

Sonik Cilt Temizleyici



Kullanım Kılavuzu

Cihaz Tanımı



Ürün Tanıtımı

Ultrason, kozmetik alanlarında yaygın olarak kullanılan yüksek frekanslı mekanik bir titreşim dalgasıdır. Mekanik dalganın mekanik, sıcak ve kataliz işlevi vardır. Düşük enerji ve yüksek frekanslı titreşimde cilt üzerinde nazik rezonans etkisi yaratabilir, hücre canlılığını ve tüm kortikal dokuların geçirgenliğini artırabilir, ter bezlerini tarayabilir ve gözenekleri küçültebilir.

Nanoteknoloji kullanan ultrasonik temizleme ve güzellik aleti, saniyede 24000 kez moleküler yoğun sürtünme sarsıntısı, moleküller arasındaki yoğun sürtünmeye kadar cildin derinliklerine titreşim, derin sıcaklık, hücre metabolizması, mikrosirkülasyonu hızlandırır, geri akış metabolizmasını teşvik eder. İyon akışının dönüşümü, hücre zarının geçirgenliğinin artması, hücre içi protoplazmik mikro akış üretmek için zar, yağ asidi ve H₂O yağ CO₂'nin hassas hacme yabancılaşması azalır, aynı zamanda hedeflenen ürünlerle kozmetik etki daha önemlidir.

Yüksek frekanslı titreşim yoluyla yapılan derin masaj, yağ hareketi sırasında mikro dolaşımı iyileştirebilir ve temiz etki elde etmek için yağ hücrelerinin ürünleri metabolize etmek için yanmasını ve parçalanmasını sağlayabilir. Özel bir kürek tipi prob kullanarak, 4-7 cm'nin altındaki cilde etkili bir şekilde nüfuz edebilir, süpersonik titreşim atomizasyonu yoluyla güzellik sıvısının incelmeye izin verebilir, kir ve fazla sebum emülsifikasyona, reçel kozmetik kalıntısına, ter ve emülsiyon gözeneklerinde, bir sıçrama ile ortadan kaldırılır, temizleme etkisi daha hızlı ve etkili. Bu, hassas makineleri temizleyen süpersonik bir yıkama ile aynıdır ve bu tür bir fenomen ciltte meydana gelecektir. Kütikül, yağ parçacıkları, akne ve benzerlerini gidermek için, bakım ürünlerinizin besinleri artık boşa gitmeyecek, böylece cilt daha iyi emilebilecektir.

Kullanım Metodu

2 EMS modunu seçmek için düğmeye iki kez basın.

Bu mod altında gençleştirme modunu ve gençleştirme gücünü değiştirebilirsiniz


EMS modu, renkli ışık fonksiyonu ile aynı zamanda essence ile birlikte kullanmak daha iyi olabilir.

3 Yüzündeki tebessüm

4 Şekil 2'de gösterildiği gibi, sonik başlı EMS



Yenileyici Mod

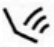1  — Nazik Mod

2  — Nokta Titreşim Modu

Gençleştirici
Güç



Temizlik & Bakım

1 Lütfen cihazın kapalı durumda olduğundan emin olun

2 Lütfen cihazı pamuklu pedler veya yumuşak kumaş ile temizleyin.

Hasarı önlemek için sonik kafayı temizlemek için seyreltici çözücü ve diğer aşındırıcı endüstriyel ürünleri KULLANMAYIN

3 Lütfen cihazı kuru ve serin bir yere koyun

Cihazı banyo gibi ıslak bir yere KOYMAYIN

Cihazı çocukların dokunabileceği bir yere KOYMAYIN

Ürün Özellikleri

- 1 Derinlemesine temizlik ve yaşlanmış horneyi temizleme
- 2 Pigment ayrışması ve tuzdan arındırma noktası
- 3 Derin Yüz Gerdirme ve cilt elastikiyetini artırma
- 4 Cilt hücrelerinin yenilenme kabiliyetini ve geçirgenliğini artırır
- 5 Cilt masajı, beslenmeye giriş ve alacalı türetme
- 6 Zarif görünüm, kullanımı, çalıştırması ve taşınması kolay
- 7 Cilde zarar vermez ve yan etkisi yoktur

Ürün Parametreleri

Ürün Adı: Sonik Cilt Temizleyici

Güç Kaynağı: AC100V-240V 50HZ/60HZ

Çıkış Voltajı: 5V/400mA

Şarj Modu: Şarj edilebilir (lityum pil)

Net Ağırlık: Yaklaşık 99g

Güç: 2W

Boyut: 173*55*15.5MM

Ürün Parametreleri

Sorunlar

Neden

Analiz

Güç kaynağı
bağlanamıyor

Yetersiz şarj

Lütfen şu adrese
bakın talimat "şarj
etme yöntemi"

Batarya gücü sıkıntısı

Kullanımda
kapatma

Otomatik kapanma
fonksiyonu (yaklaşık 20
dakika sonra otomatik
kapanma fonksiyonu)

Normal işlev,
sorunsuz

Pil gücü yetersizliği
(cihaz "bi bi-bi" sesi
çıkartır.)

Lütfen "Şarj
Yöntemi"
talimatına bakın

Yeniden şarj
edilemiyor

USB arayüzü şarj
edilebilir cihaza
bağlı değil

Lütfen USB şarj
hattını bağlayın

Şarjda kullanılan
cep telefonu için
lityum pil şarj
cihazı!

Lütfen şarj
cihazını değiştirin

Şarj cihazı arızası

Lütfen şarj cihazını
yeniden başlatın

Adaptör (ayrı
satılır) hatası

Lütfen diğer şarj
cihazları

Talimatlar

TEMİZLİK

- 1 Bölmeyi açmak için güç düğmesine 1 saniye boyunca basın
- 2 Temizleme modunu seçmek için düğmeye bir kez basın
Bu mod altında gençleştirme modunu ve gençleştirme gücünü değiştirebilirsiniz
Temizleme modu, aynı zamanda motor ışığı fonksiyonu ile. Çalıştırma moduna girmek için her iki ön iletkeni tutun, Modu başlatmadan önce yüzü temizleyici ile temizlemek daha iyi olabilir.
- 3 Yüze krem sürün
- 3 Şekil 2'de gösterildiği gibi, sonik başlık ile yüzü temizleyin.



NUTRI

- 1 Cihazı açmak için güç düğmesine 1 saniye basın
- 2 Nutri modunu seçmek için düğmeye iki kez basın.
Bu mod altında gençleştirme modunu ve gençleştirme gücünü değiştirebilirsiniz.
Nutri modu, renkli ışık fonksiyonu ile aynı zamanda iyon moduna girmek için ön iletkeni her ikisini de tutar.
Bu moda başlamadan önce maske kullanmak daha iyi olabilir.
- 3 Yüzünüze güzellik sıvısını sürün
- 4 Şekil 2'de gösterildiği gibi, sonik başlıkla giriş



EMS

- 1 Cihazı açmak için güç düğmesine 2 saniye basın

Şarj Yöntemi


1 Şarj hattı bağlantısı USB arayüzü

Ürün fabrikadan çıktığında pil tam olarak dolu değildir.
Lütfen kullanmadan önce pili tamamen şarj edin

2 Bilgisayarın USB arayüzü, adaptör (ayrı satılır) ve cep telefonu adaptörü şarj için kullanılabilir.

LED ışığı şarj olurken kırmızı renk gösterir, tam şarj olduktan sonra yeşil renk gösterir.

Lütfen şarj etmeden önce lityum pilin durumunu onaylayın.
Lütfen ilk kullanımdan önce koruyucu filmi çıkarın.

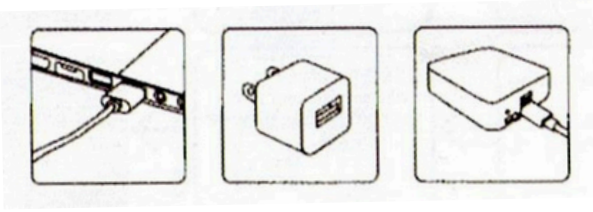

NOTLAR

Güç düğmesine uzun süre bastıktan sonra önyükleme yapamıyorsa lütfen cihazı şarj edin.

Cihaz "bi-bi-bi" sesi çıkarıyorsa lütfen cihazı şarj edin,

Pil gücü azaldığında cihaz otomatik olarak kapanacaktır.

Ürün on dakika kullanıldıktan sonra otomatik olarak bekleme durumuna geçecek ve kullanılmazsa bir dakika sonra kapanacaktır.

Tam şarj yaklaşık 150 dakika sürer (İlk kullanımda beş saatten fazla şarj edilmesi gerekir).

Device tam olarak şarj edildikten sonra yaklaşık 80 dakika kullanılabilir.

Lütfen cihazı kullanmadan önce zamanında şarj edin

GARANTİ BELGESİ

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMANIN :

ÜNİVANİ: EAST MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES : FEVZİÇAKMAK MAH. YAKAMOZ CD.
NO:11/C KARATAY/KONYA

Müşteri Hizmetleri : +90 (850) 255 42 42

Firma İmza ve Kaşesi :

 EAST EAST MEDİKAL
Fevziçakmak Mah. 10659. Sk. Yakamoz Cd. No.C11
Tel: 0533 693 25 42 Karatay/KONYA
Selçuk V.D 3231 205 560

Azami Tamir Süresi : 30 Gün

Garanti Süresi : 1 Yıl

Belge Numarası :

Belge Tarihi :

Markası : **SHINE**

Modeli : **UKR-01**

Cinsi : **Sonic Yüz Temizleme**

SATICI FİRMANIN :

Ünvanı :

Adresi :

Tel :

Fatura Tarihi ve Numarası :

Tarih :/...../202...

İmza :

KAŞE

Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar.

Fatura Tarihi Esas Alınır



GARANTİ BELGESİ

Aşağıdaki şartlar yerine getirildiği takdirde, ürünlerin garanti süresi içinde bedelsiz olarak onarımı söz konusudur.

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDAKİ HALLER:

1. Malın tüketiciye tesliminden sonra nakliyeden kaynaklanan hasarlar, darbeler, (çarpma, kırma, çizme, kimyasal, elektrokimyasal ve elektronik etkiler) kullanılan tesisattan kaynaklı hatalar,
2. Ardından, tarafından yapılan yanlış depolama ve orta koşulları,
3. Kaynak sorunları (doğal afetler, yangın, su baskını vb. felaketler),
4. SU SIÇRAMALARI Sonucu elektronik veya mekanik parçalara verdiği hasarlar,
5. Cihaz kullanırken veya ilk devreye alınana kadar emin olun orta koşullarının uygun olmamasından doğan sorunlar (toz, temizlik, kurum, kapak, su, nem, bakım eksikliği, vb.)
6. Kireç, çamur, çapak, demir ya da pisliklerinden meydana gelen kullanacağınız suda tıkanıklık ve hasarlar
7. Cihaz sıcak iken soğuk su verilmesi ya da cihazın susuz çalıştırılması sonucu meydana gelen hasarlar
8. Elektrik tesisatında sigorta kullanımı, elektrik tesisatında topraklamadan kaynaklanması sorunlar. Kaynaklanan veya elektrik tesisatından dolayı meydana gelen yüksek ya da alçak ihtiyaçtan kaynaklanan veya elektrik tesisatından dolayı meydana gelen hasarlar.

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Satıcı, malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiç bir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.[2]

Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın:

1. Tüketicieye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
2. Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
3. Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
4. İmalatçı-üretici veya ithalatçılar, garanti belgesi ile sattıkları malların bakım onarım ve kullanımına ilişkin satış sonrası servis hizmetlerini yeterli olarak vermek ve bunun için gerekli tedbirleri almak zorundadır.
5. Tüketicinin bu taleplerine karşı satıcı, bayii, acente, imalatçı - üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludurlar.
6. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.