

KULLANIM KLAVUZU

SHINE SD-02

Yanlış kullanımdan kaynaklanan zararları önlemek için, bu ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun,
Ve bu ürünü kullanmak için kullanım talimatlarına kesinlikle uyun.

Rehber

1, Ürüne Genel Bakış

1.1 Cihaz Tanımı -----1

2, Ana Açıklama

2.1 Özellik Tanıtımı

2.2 Ürün Özellikleri -----2

3, Kullanım talimatları -----3

4, Kullanım yöntemi -----4


5, Güvenlik hususları -----5

6, Ürün parametreleri -----6

1. Ürüne Genel Bakış

1.1 Cihaz Tanımı

- ① Devir konum ışığı
- ② Devir konumu düğmesi
- ③ Cilt temas yüzeyi
- ④ Güzellik cihazı
- ⑤ Anahtar/mod düğmesi
- ⑥ Mod ışığı

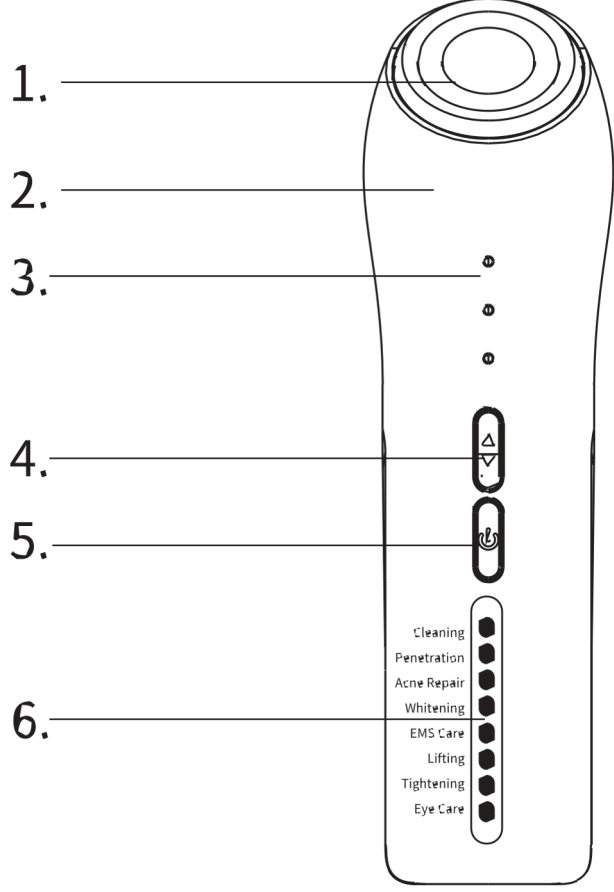

2. Temel Açıklaması

2.1 Fonksiyon Tanıtımı

*Pozitif ve negatif iyonlar: Pozitif ve negatif iyonların zıt çekim prensibini kullanarak, derin gözenek kirleri biyolojik akımlar yoluyla dışarı çıkarılır, derinlemesine temizlenir ve güzellik bileşenleri iyonlar yoluyla cilde verilir.

* Titreşim: Titreşim ve voltaj uyarımı kullanılarak insan cildi sıkılaştırılır, elastikiyeti artırılır ve cilt hücrelerinin metabolizması geliştirilir.

*Sıcak: Ilık masaj emilimi teşvik eder ve cilt dokusunu esnetir. Cilt daha dolgun hale gelir.

*Pulse ışık: dermise derinlemesine nüfuz eder, kolajen ve elastin çoğalmasını teşvik eder, kırışıklıkları azaltır, cildi aktive eder ve cildi sıkıca gevşetir ve genç canlılığını geri kazandırır.

*RF radyo frekansı: Radyo frekans akımı insan vücudundaki dokulardan geçtiğinde, dokuların radyo frekans dalgalarına karşı direnci, dokudaki (dermis) yüklü iyonların veya moleküllerin hızla salınmasına neden olarak, dermiste daha fazla kolajen üretimini teşvik etmek için ısı enerjisi üretirken, bazı hücreleri çözerek sıkılaştırma, zayıflama ve cilt elastikiyetini artırma etkilerini elde eder.

2.2 Ürün Özellikleri

① EMS modu

Mikro akım olarak adlandırılır ve ana işlevi kas spazmlarını gevşetmek, egzersizi artırmak, kas atrofisini azaltmak ve önlemek, yerel kan dolaşımını artırmak ve kasları tekrar çalıştırmaktır. Kasları ve lenf düğümlerini uyarmak, kasları kasılmak ve ödemi giderme ve sıkılaştırma etkisi elde etmek için zayıf akım kullanın. Kullanırken, akımın deriden geçtiğini ve kas tabakasını etkilediğini gösteren hafif bir iğnelenme hissi vardır. Tekrar kullanıldığında kasların titrediği hissedilebilir.

2 Kırmızı ışık modu

Kırmızı ışık hücre yenilenmesini aktive etmeye yardımcı olur, cilt bakım ürünlerini tam olarak tanıtır,

Sıcak masaj kan dolaşımını teşvik eder, cildin sıkılığını artırır ve elastikiyet kazandırır ve cildi uzun süre optimum durumda tutar. Kırmızı ışık Güzel ve yumuşak bir cilt elde etmek için hücre aktivitesini artırır, kırışıklıkları azaltır. Cildin parlaklığını ve canlılığını tamamen geri kazandırır.

3 Mavi ışık modu

Cilt bakım ürünlerini tamamen tanıtan mavi ışık, hassas ciltler için uygundur, Yağlı ve akneye eğilimli ciltler. Hedefe ulaşmak için akne bakterilerini azaltabilir akne ve sivilceleri giderir, protein ve kolajen sentezini destekler ve cildi aktive eder.

4 İçer Aktarma Dışa Aktarma Modu

Gözeneklerin sıcak bir şekilde açılması, cilt bakım ürünlerinin cilt tarafından daha iyi emilmesini sağlar. ve titreşim yoluyla cilt bakım ürünleri cildin daha derinlerine nüfuz edebilir, cilt, etkinliklerini en üst düzeye çıkarır.

⑤ RF radyo frekansı

Radyo frekans akımı insan vücudundaki dokulardan geçtiğinde, dokuların radyo frekans dalgalarına karşı direnci, dokudaki (dermis) yüklü iyonların veya moleküllerin hızla salınmasına neden olarak, dermiste daha fazla kolajen üretimini teşvik etmek için ısı enerjisi üretirken, bazı hücreleri çözerek sıkılaştırma, zayıflama ve cilt elastikiyetini artırma etkilerini elde eder.

3. Kullanım Talimatları

1: Kullanım sırasında, şarj etmek için adaptörü takın ve otomatik olarak şarj durumuna geçin. Şarj durumunda kullanmayın. Pil seviyesi düşük olduğunda, kademe gösterge ışığı yanıp söner ve kapanır. Mümkün olan en kısa sürede şarj edilmesi önerilir.

2: Anahtar/mod düğmesi:

Makineyi açmak veya kapatmak için anahtar düğmesini yaklaşık 0,6 saniye basılı tutun
2 Kısa basma modu anahtarı, varsayılan olarak derin temizlemeye, nüfuz etmek ve içe aktarmak için bu düğmeye kısa basın - akne onarımı - cilt gençleştirme ve beyazlatma - EMS bakımı - kaldırma ve sıkılaştırma - onarım ve sıkılaştırma - göz bakımı modu sırayla dönmek için

Devir düğmesi: Varsayılan olarak, birinci devirde devri değiştirmek için kısa basın. Birinci devirde bir devir ışığı yanar, ikinci devirde iki devir ışığı yanar ve üçüncü devirde üç devir ışığı yanar. Her mod değişiminden sonra, ilk devir geri yüklenir.

4. Kullanım yöntemi

◆ Kullanım için hazırlık:

1. Ev tipi güzellik cihazını kullanmadan önce yüzünüzü temizleyin, makyajınızı çıkarın, gözlerinizi ve dudaklarınızı nemsiz tutun. Yüzünüzdeki, ellerinizdeki ve boynunuzdaki metal takıları çıkarın.

2. Makinenin üzerindeki toz ve diğer lekeleri temizlemek için temiz bir pamuklu ped veya bez kullanın ve kuru ve temiz tutun.

3. Makineyi kendi ihtiyaçlarınıza göre uygun moda ayarlayın.

◆ Mod kullanım yöntemi:

Derin temizlik: Gözeneklerin derinliklerindeki kirleri temizlemek için yüksek frekanslı titreşim kullanın ve ardından yüzünüzü temizlemek için yüz temizleyici kullanın.

İnfiltrasyon: Eşit şekilde uygulayın

esans ve diğerk cilt bakım ürünlerini yüze uygulayın, makineyi penetrasyon moduna ayarlayın, cilt bakım ürünlerinin emilimini artırmak için yüzü yukarı doğru kaldırın ve masaj yapın ve sabit nokta ışınlamasıyla kırışıklıkları ve diğerk cilt sorunlarını ışınlayın.

Yüz akne onarımı: Temizleme işleminden sonra yüzdeki sivilceli ve çukurlu bölgelere 2-3 dakika boyunca spot aydınlatma uygulayın. Cilt gençleştirme ve beyazlatma:

Temizledikten sonra, cilt bakım ürünlerini yüze eşit şekilde uygulayın, daireler çizerek nazikçe masaj yapın ve her bölgeye üç kez ileri geri masaj yapılmalıdır.

EMS bakımı: Temizledikten sonra yüzü kurulaşın ve ince bir cilt toniđi tabakasını eşit şekilde uygulayın.

Makineyi EMS bakımına ayarlayın ve yüzün çevresi boyunca aşağıdan yukarıya doğru tüm yüze masaj yapın.

Kaldırma ve sıkılaştırma/onarma sıkılaştırma: Esans ve diğerk cilt bakım ürünlerini yüze eşit şekilde uygulayın, yüz çevresi boyunca yukarı doğru itin ve sırayla tüm yüze masaj yapın.

Göz bakımı: Gözlere uygun miktarda göz kremi sürün, makineyi göz bakım moduna ayarlayın, gözleri kapatın ve tüm göz çevresine hafif bir basınçla iyice masaj yapın.

Şarj yöntemi:

1. Lütfen ürüne dahil olan USB şarj kablosunu ana cihaza ve aşağıdaki USB güç kaynađı malzemelerine bağlayın. (Şarj için USB konektörü, cep telefonu şarj cihazı, taşınabilir güç bankası, araba USB konektörü, bilgisayar veya dizüstü bilgisayar USB arayüzü).

2. DC5V/500MAH veya daha yüksek bir şarj cihazı kullanılması tavsiye edilir.

3. Yanıp sönen gösterge ışığı şarj işleminin devam ettiđini ve şarj tamamlanma gösterge ışığının yandığını gösterir.

4. Kapalı durumda şarj ettiđinizden emin olun.

5. Güvenlikle ilgili hususlar

1. Cihazı kullanırken, prob gözlere yakın olmamalı, gözlerden veya hassas organlardan geçmemelidir.

2. Yüz plastik cerrahisi, hamile kadınlar, 15 yaşın altındaki çocuklar, ciddi cilt hastalıkları olan hastalar, yüzeysel yara izleri, kırılğan cilt ve hassas

Işığa karşı cilt kullanılmamalıdır; Ağır kalp hastalığı olan hastalar için yasaklanmıştır.

3. Temas yüzeyini bir mendil veya havlu ile silin, suyla yıkamayın ve metal nesnelere dokunmayın

4. Elektrik kaçağı, yanık, yangın veya hasarı önlemek için, ürünü suya daldırmayın, düşmeye müsait bir yere koymayın veya saklamayın ve küvet, duş, lavabo veya tuvaletin yanına koymaktan kaçınınız. Ürün arızalandığında, lütfen kullanmayı bırakın.

5. Kozmetik aletinin foton giriş etkisi vardır. Kozmetik alet gözünüzden geçerken lütfen gözlerinizi kapatın. Göz derisinin çok incelmesini ve ışığın gözlere zarar vermesini önleyin.

6. Akne, sivilce ve kırmızı kana duyarlı kasların her gün değil, haftada bir kez kullanılması önerilir.

7. Su ve yağ gibi maddeler cihazın içine girmemeli ve cihaza zarar vermemek için cihaza vurulmamalı, çarpılmamalı veya ağır bir şekilde düşürülmemelidir.

8. Kullanılmadığında, probu derhal temizlediğinizden ve güç kaynağının bağlantısını kestiğinizden emin olun.

9. Yedi günden uzun süre kullanılmayacaksa, gövdeyi ve şarj kablosunu ayırdıktan sonra gücü kapattığınızdan ve sakladığınızdan emin olun.

10. Pili tamamen boşalana kadar kullanmayın. Kullanmadan önce herhangi bir zamanda şarj edilmesi önerilir.

11. Cihazı atmadan önce, pil cihazdan çıkarılmalıdır. Pili çıkarırken, cihazın gücü kapatılmalıdır.

12. Piller güvenli bir şekilde atılmalıdır. Kullanılmayan kırmızı bir çöp kutusuna atın ve gelişigüzel atmayın. Çevre kirliliğine neden olmamak için.

13. Yangına, elektrik çarpmasına ve diğer tehlikelere neden olabilecek yanıcı ve patlayıcı maddelerin (sprey ve benzin istasyonları dahil) yakınında kullanmayın.

14. Yetkisiz modifikasyonlar kabul edilemez risklere neden olabileceğinden, yetkisiz modifikasyonlar yasaktır.

15. Ürüne ciddi şekilde zarar vereceğinden, ürünü doğrudan güneş ışığına veya ultraviyole ışığa uzun süre maruz bırakmayın.

Ürün Adı	SHINE
Ürün modeli	SD-02
Ürün boyutu	154*43*39mm
Net ağırlık	140G
Şarj voltajı	5V ==
Nominal güç	5W

Sembol açıklaması:

Duş alırken veya duş yaparken kullanmayın.

Uyarı: Bu ürünü küvet, duş teknesi, lavabo veya diğer su kaplarının yakınında kullanmayın. Lütfen bu ürünü ve güç adaptörünü kuru tutun;



Çevrenin korunması Ürünleri atarken, lütfen bunları genel evsel atıklarla birlikte atmayın. Çevrenin korunması için faydalı olduğundan, belirlenmiş bir geri dönüşüm merkezine teslim edilmelidirler.



KONTAK **EASTMEDİKAL**

İletişim Bilgileri

Eastmedikal ile iletişime geçmek isterseniz lütfen **eastmedikal.com** adresini ziyaret edin veya e-posta gönderin. **bilgi@eastmedikal.com**

 0850 255 42 42

Üretici Firma :

Guangzhou Defond Electronic Technology Co. Ltd.
2nd Bldg C, No.569, Huangbian North Baiyun District,
Guangzhou, CHINA

İthalatçı Firma :

EAST MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.
Fevziçakmak Mah. Yakamoz Cd. No:11/C Büsan Organize Sanayi
42050 Karatay KONYA

