

PORTATİF HAVA SIKILAŞTIRICI

KULLANIM KLAVUZU



Sayın Müşterimiz,
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Daha iyi kullanım ve güvenlik için, lütfen herhangi bir işlem yapmadan önce
bu kılavuzu okuyun. Lütfen bu kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın.

Tanım : Portable Ems stimulation machine

Model : RU-1605C

ÇALIŞMA PRENSİBİ


Pressoterapi vücut şekillendirme cihazı, hem tüm vücut hem de vücudun belirli bölgeleri için döngülere göre veya hep birlikte baskıya izin veren bir dizi kumaş benzeri aksesuara ve 16 adet hava yastığına sahip, venöz ve lenfatik akışı artırmak ve hücre dışı sıvı temizliğini artırmak için tasarlanmış bir sıkıştırma sistemidir.

Vücudun doğal toksin temizleme işlevlerini desteklemeye yardımcı olur. Dokunun canlanması ve oksijenlenmesi, cilt sıkılığını artırırken bacakların, karnın ve kolların incelmeye ve yeniden şekillenmesine yardımcı olur. Liposuction'a güvenli bir alternatif olan selülit işlemi için şiddetle tavsiye edilir. Şişliği giderir ve anında rahatlık sağlar. Cilt sıkılığını artırırken bacakları, karnı ve kolları yeniden şekillendirir.


Fonksiyon:

- 1) Detoksifikasyon
- 2) Vücut şekillendirme; Vücut kaslarını sıkılaştırır.
- 3) Vücut Şekillendirme;
- 4) Lenfatik için fiziksel işlem;
- 5) Rahatlama;
- 6) Selülitleri azaltır.

Hava yastığı : (16 adet)

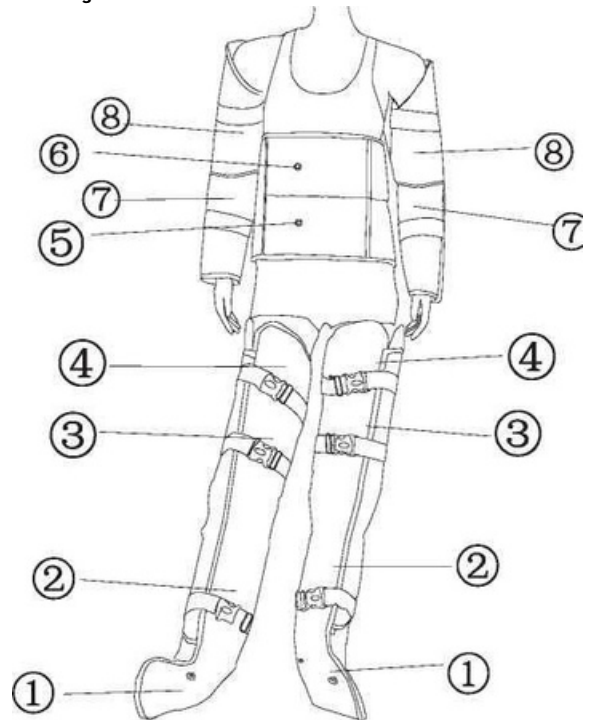

KONTROL PANELİ

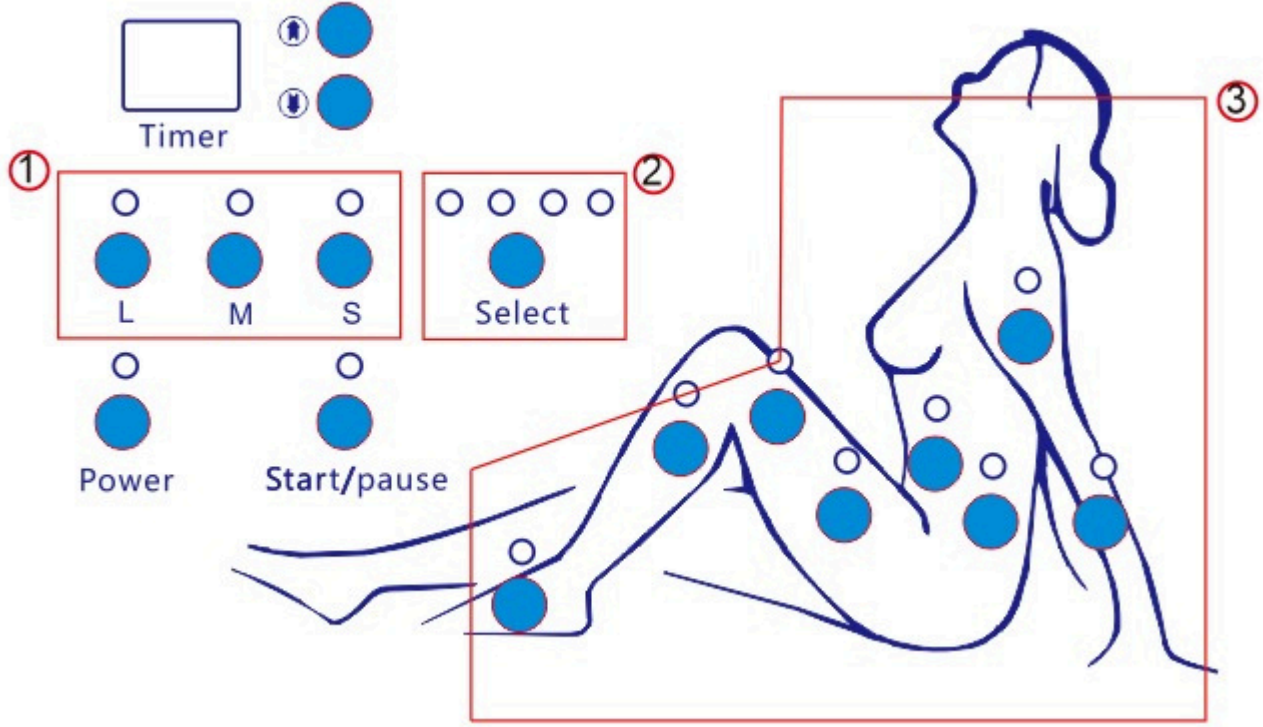

1. Seçiminiz için hava basıncı gücü için 3 farklı seviye

2. Bakım için 4 farklı mod

Soldan sağa doğru:

İlk üç mod otomatik moddur ve dördüncü mod manuel moddur :

(1) Hava akışı: ayak - bacaklar - bel-kollar. İlk hava yastığını ve ardından bir sonrakini şişirin ve bırakın.

(2) Hava akışı: ayak - bacaklar - bel - kollar. İlk hava yastığını ve ardından bir sonrakini şişirin ve bırakın. 3 kez sonra, tüm hava yastıklarını birlikte şişirin.

(3) Hava akışı: ayak - bacaklar - bel - kollar. İlk hava yastığı, bir sonrakini şişirirken hava basıncını serbest bırakmaz, bu nedenle tüm hava yastıkları bittiğinde şişmeye devam eder.

(4) Panelde gösterildiği gibi herhangi bir hava yastığını seçebilirsiniz.

3. Gösterge ışığından hangi bölgenin çalıştığını gösterir

KURULUM AŞAMALARI



A'yı makinenin A çıkışına, B'yi B çıkışına bağlayın. Tüpleri, tüp ve bez üzerindeki 1-8 numaralarına göre beze bağlayın.

Çalıştırma:

1. Giysileri giyin ve hava yastıklarını iyi durumda bağlayın.
2. Gücü açın, gösterge yanacaktır.
3. Her Bakım için yoğunluğu, zamanı ve Modu seçin.

İşte önerilen ayarlar:

- Yağ: 1 program seçin, standart süre 60 dakikadır ve yoğunluk için L'yi seçin.
 - Orta yağlı vücut: 1 veya 2 program seçin, standart süre 30-45 dakikadır ve yoğunluk için L veya M'yi seçin.
 - Biraz yağlı vücut: Orta yağlı vücut, 2 program seçin, standart süre 30- 45 dakika ve yoğunluk için M veya S'yi seçin.
 - Ağırılığı koruyun: manuel programı seçin ve 5 hava yastığı seçin.
- Müşterinin formunu koruması gerekir ve standart süre 20~30 dakikadır.
- Lenfatik: 3 program seçin, standart süre 20~35 dakikadır.

4. Bakımı başlatmak için "Başlat/Duraklat" düğmesine basın

Uyarılar:

1. Müşteri Bakım dan önce tüm takılarını çıkarmalıdır.
2. Vücudunda metal bulunan müşterilerin ve hamile kadınların bu makineyi kullanması önerilmez.
3. Bir günlük kullanımdan sonra makineyi kapatın ve fişini çekin.

Makineyi silmek için sadece kuru bez kullanın.

Tanım : Portable Ems stimulation machine

Model : RU-1605C

Not: Ürünlerimizin tasarım veya özellik değişikliği için daha fazla bilgi almak istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin.

YASAL GARANTİ SÜRESİ : 2YIL

CİHAZIN KULLANIM ÖMRÜ : 10 YIL

GARANTİ KAPSAMINDA VEYA DIŞINDA DEĞİŞİMİ YAPILAN PARÇALARIN GARANTİ SÜRESİ 1 YILDIR.

ŞARTLAR VE KOŞULLAR

Garanti dahil şartlar ve koşullarımız hakkında daha fazla bilgi için lütfen web sitemize bakın.

Üretici Firma :

Guangzhou Cynthia Beauty Equipment Co., Ltd

Manufacturer: Guangzhou Cynthia Beauty Equipment Co.,Ltd
3 Floor, 3 Building, Shunxiang Industrial Zone, Jiahe Street, Baiyun

İthalatçı Firma :

EAST MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.

Fevziçakmak Mah. Yakamoz Cd. No:11/C Büsan Organize Sanayi
42050 Karatay KONYA

0850 255 42 42

Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir ve Eastmedikal'nin bir taahhüdü olarak yorumlanmamalıdır. Eastmedikal., bu belgede görülebilecek herhangi bir hatadan sorumlu değildir ve ticari elverişlilik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili kısmi garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu materyalle ilgili olarak açık veya kısmi hiçbir garanti vermez. Eastmedikal., bu belgenin ve program materyalinin kullanımıyla bağlantılı veya kullanımından kaynaklanan tesadüfi veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan sorumlu olmayacaktır.

LÜTFEN BU BİLGİLERİ İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN.

Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizimle
0850 255 42 42 telefondan iletişime geçin.

SATINALMA TARİHİ

FATURA NUMARASI

İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SATIN ALMA TARİHİNİZİ VE FATURA NUMARANIZI NOT EDİN

GARANTİ BELGESİ

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMANIN :

ÜN VANI: EAST MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES : FEVZİÇAKMAK MAH. YAKAMOZ CD.

NO:11/C KARATAY/KONYA

Müşteri Hizmetleri : +90 (850) 255 42 42

Firma İmza ve Kaşesi :

 EAST MEDİKAL
MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Fevziçakmak Mah. 10659. Sk. Yakamoz Cd. No:C11
Tel: 0533 693 25 42 Karatay/KONYA
Selçuk V.D 3231 205 560

Azami Tamir Süresi : 30 Gün

Garanti Süresi : 1 Yıl

Belge Numarası :

Belge Tarihi :

Markası : **CYNTHIA**

Modeli : **RU-1605C**

Cinsi : **PORTATİF LENF DRENAJ**

SATICI FİRMANIN :

Ünvanı :

Adresi :

Tel :

Fatura Tarihi ve Numarası :

Tarih :/...../202...

İmza :

KAŞE



GARANTİ BELGESİ

Aşağıdaki şartlar yerine getirildiği takdirde, ürünlerin garanti süresi içinde bedelsiz olarak onarımı söz konusudur.

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDAKİ HALLER:

1. Malın tüketiciye tesliminden sonra nakliyeden kaynaklanan hasarlar, darbeler, (çarpma, kırma, çizme, kimyasal, elektrokimyasal ve elektronik etkiler) kullanılan tesisattan kaynaklı hatalar,
2. Ardından, tarafından yapılan yanlış depolama ve orta koşuları,
3. Kaynak sorunları (doğal afetler, yangın, su baskını vb. felaketler),
4. **SU SIÇRAMALARI** Sonucu elektronik veya mekanik parçalara verdiği hasarlar,
5. Cihaz kullanırken veya ilk devreye alınana kadar emin olun orta koşullarının uygun olmamasından doğan sorunlar (toz, temizlik, kurum, kapak, su, nem, bakım eksikliği, vb.)
6. Kireç, çamur, çapak, demir ya da pisliklerinden meydana gelen kullanacağınız suda tıkanıklık ve hasarlar
7. Cihaz sıcak iken soğuk su verilmesi ya da cihazın susuz çalıştırılması sonucu meydana gelen hasarlar
8. Elektrik tesisatında sigorta kullanımı, elektrik tesisatında topraklamadan kaynaklanması sorunlar. Kaynaklanan veya elektrik tesisatından dolayı meydana gelen yüksek ya da alçak ihtiyaçtan kaynaklanan veya elektrik tesisatından dolayı meydana gelen hasarlar.

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Satıcı, malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiç bir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.[2]
Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın:

1. Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
2. Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
3. Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
4. İmalatçı-üretici veya ithalatçılar, garanti belgesi ile sattıkları malların bakım onarım ve kullanımına ilişkin satış sonrası servis hizmetlerini yeterli olarak vermek ve bunun için gerekli tedbirleri almak zorundadır.
5. Tüketicinin bu taleplerine karşı satıcı, bayii, acente, imalatçı - üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludurlar.
6. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.