

TR

# SHINE

## IPL Epilasyon Aleti Kullanım Kılavuzu



Model No: HP-01

# İÇİNDEKİLER

GÜVENLİK YÖNERGELERİ .....	01
ÜRÜN TANITIMI .....	01
LCD EKРАН .....	01
IPL EPİLASYONUN İŞLEVİ .....	02
NASIL KULLANILIR .....	02
TEDAVİ SÜRECİ .....	04
TEMİZLİK & SAKLAMA .....	05
UYARILAR! .....	05
KONTRENDİKASYONLAR: .....	05
TEKNİK ÖZELLİKLER .....	06
ÇEVRESEL ÖZELLİKLER .....	06
GARANTİ... .....	07
CİLT TESTİ .....	07
SORULAR & CEVAPLAR .....	07




# IPL Epilasyon Cihazı



## GÜVENLİK KILAVUZU


1. Panadoo epilasyon cihazını ilk kez kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu okuyun.
2. Lütfen kullanmadan önce tüm uyarı bildirimlerini ve güvenlik yönergelerini okuyun ve ürünü bildirimlere ve yönergelere uygun olarak kullanın.
3. IPL epilasyon cihazı gözlerinizi korur. Cihazın temas yüzeyi havaya bakarken ışık dalgalarının çıkmasını önlemek için tasarlanmıştır. Yalnızca temas yüzeyinin üst kısmı cilde tam olarak temas ettiğinde çalışacaktır.

## ÜRÜN TANITIMI

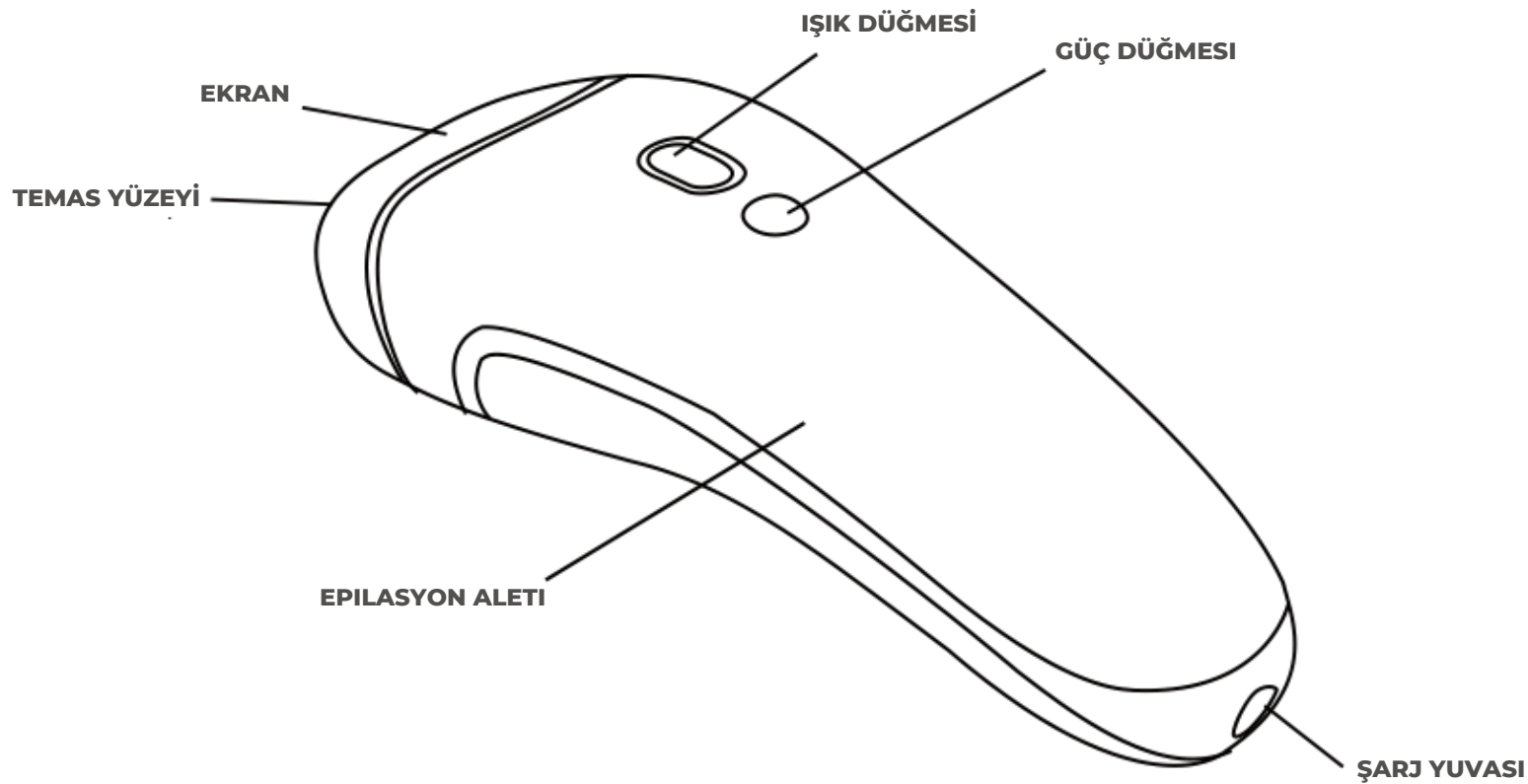

## LCD GÖSTERGE EKRANI

1. Flaş Kalan Sayı Ekranı
2. Devir Göstergesi
3. Otomatik Sürekli Mod
4. Soğutma Fanı

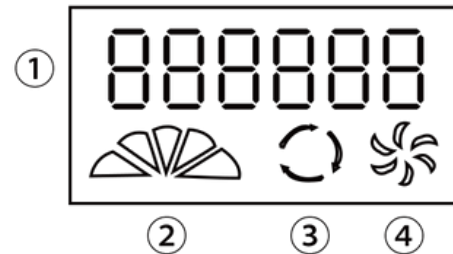

## CILT TONU TABLOSU

✓	✓	✓	✓	✗	✗
Beyaz	Fildişi	Bej	Açık Kahve	Orta Kahve	Koyu Kahve

## SAÇ RENK TABLOSU

✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Siyah	Koyu Kahve	Orta Kahve	Açık Kahve	Sarışın	Kırmızı	Beyaz Gri

Not: Cildiniz son 4 hafta içinde yapay veya doğal olarak bronzlaştıysa veya aşırı güneşe maruz kaldığınız için yandıysa lütfen cihazı KULLANMAYIN.

## IPL EPİLASYONUN FONKSİYONU

IPL epilasyon sistemi vücuttaki fazla tüyleri almak için kullanılır Etkisi uzun süreli ve kalıcıdır. Kalıcı epilasyon, bir tedavi sürecinden sonra kıl büyümesinde uzun süreli istikrarlı bir azalma olarak tanımlanır.

İdeal tedavi vücut bölgeleri şunlardır: koltuk altı, bikini bölgesi, kollar, bacaklar, yüz, omuzlar ve göğüs.

## NASIL KULLANILIR


## ● KULLANMADAN ÖNCE



1. Kullanmadan üç gün önce, lütfen önce ciltteki tüyleri almak için tıraş bıçağını kullanın. Eğer kıl 2 mm'yi geçmiyorsa tıraş olmadan doğrudan kullanılabilir.




2. Cihazımızı kullanmadan önce ağda ile tüyleri almayın veya herhangi bir alet ile tüyleri yolmayın. IPL teknolojisi esas olarak kıl köklerinde çalışır. Fazla kılların jilette alınması, kıl köklerinin ışık dalgalarını daha iyi emmesini sağlar ve böylece etkili bir rol oynar. Eğer fazla tüyler çıkarıldığında, ürün kullanıldığında yanık kokusu olacaktır.

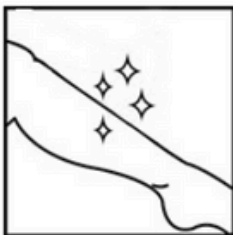

3. Cilt herhangi bir pudra, ter önleyici veya deodorant uygulanmadan temiz ve kuru tutulmalıdır. Ve epilasyon cihazının temas yüzeyini kuru bir bezle (ekli) silin.


## ● KULLANIMDA

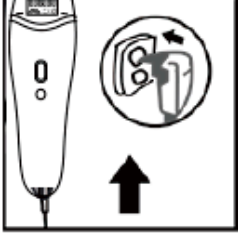

1. Güç adaptörünü bağlayın ve ışık göstergesi kırmızıya dönüp yanıp sönmeye başlarsa bağlantı normal demektir.



2. LCD ekran yanana kadar güç anahtarı düğmesine uzun basın.

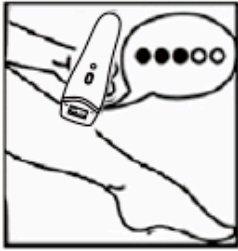

3. Hızı 1. hızdan (en düşük) 5. hıza (en yüksek) ayarlamak için güç anahtarı düğmesine kısa basın. İlk kullanım için 1. hızdan başlanması önerilir. Daha yüksek hızı hemen kullanırsanız, ciltte rahatsızlığa neden olabilir. Daha sonraki kullanımlarda yüksek hızı teker teker ayarlayabilirsiniz. Herhangi bir rahatsızlık varsa, lütfen kabul edebileceğiniz daha düşük hıza geri dönün. Bir dahaki sefere aynı yoğunluk seviyesini kullanmak için, lütfen bu sefer kullandığınız yoğunluk seviyesini aklınızda tutun.



4. Lütfen gözlük takınız. Cilt ile tam teması sağlamak ve enerji dağılımını önlemek için lütfen epilasyon cihazını 90° dikey açıyla cilde temas edecek şekilde kullanın.



5. Temas yüzeyini cilde tamamen yerleştirin, cihazın flaş düğmesine hafifçe basın ve cihaz yanıp sönecektir.

6. Cihazı ışık yaymak için kullandıktan sonra epilasyon gerektiren bölgeyi değiştirin. (Aynı vücut bölgesine tekrar tekrar ışık dalgaları göndermekten kaçının).

7. Tüm alanların düzgün bir şekilde işlendiğinden emin olmak için önceden işlenmiş alana mümkün olduğunca yakın yerleştirin.

### İKİNCİ UYGULAMA MODU:

[Press ve Flaş Modu] ve [Slayt ve Otomatik Flaş Modu]. Vücudun farklı bölgelerinde kullanmanız için daha uygundur.

- Press ve flaş modu dizler veya koltuk altları gibi küçük veya kavisli alanlar için uygundur. Sadece flaş düğmesine basın ve bir flaş patlasın.
- Kaydırmalı ve otomatik flaş modu kollar, bacaklar vb. gibi geniş alanlar için uygundur. Sadece kayan flaş moduna ayarlayın ve birden fazla flaş sürekli olarak patlayacaktır.

**Modlar nasıl değiştirilir:** Modları değiştirmek için kaydırma ve otomatik flaş modu düğmesine yaklaşık 2 saniye boyunca uzun basın.

## ● KULLANIM SONRASI

1. Deride hafif iltihaplanma veya karıncalanma ya da ateş görülebilir. Bu reaksiyonlar tamamen zararsızdır ve kısa sürede kaybolacaktır.
2. Tedaviden sonra batma veya kızarıklık yaşarsanız, cildinizin tedavi edilen bölgesine herhangi bir losyon, krem, deodorant, nemlendirici veya kozmetik uygulamadan önce lütfen bu durumların ortadan kalkmasını bekleyin.
3. 2-5 yoğunluk seviyesini kullandıktan sonra cildi güneş ışığına maruz bırakmayın.

## T E D A V İ S Ü R E C İ

Ortalama saç büyüme döngüsü yaklaşık 18 ila 24 aydır. Bu süre zarfında, uzun süreli epilasyon elde etmek için birden fazla seansa ihtiyacınız olabilir.

Epilasyonun etkisi kişiden kişiye ve kullanım yöntemine göre değişir. Farklı vücut bölgeleri ve kıl renkleri de epilasyon cihazının kullanımını etkileyecektir.

● Tam bir tüy büyüme döngüsünde, önerilen epilasyon planımız şöyledir::

1. Aşama 4 Hafta Boyunca Haftada 13 Kez Uygulayın [Hipnotik Kıl Folikülleri]  
( Kılların görünümü değişmeyecektir, lütfen bu süre zarfında sabırlı olunuz).
2. Aşama Haftalık 5-8 Hafta İçinde [Tüy Dökülmesi]  
(Tüyler ince ve yumuşak olacak, duşta siyah tüy köklerinin döküldüğünü göreceksiniz).
3. Aşama 3 Ay Boyunca Ayda İki Kez [Tüy Uzaması Temelde Bastırılır]  
(Tüyler artık tekrarlayıcı değildir, onları nazikçe çekip çıkarabilirsiniz).
4. Aşama Dört Ay Boyunca Ayda Bir Kez --- [Yenilenmeyi Durdurma]  
(Kalıcı epilasyon elde etmek için, bazı vücut bölgelerinin

6 ay, 9 ay ve 12 aylık takip bakımları için farklı zamanlarda bakımı gerekir)

## TEMİZLİK & SAKLAMA



1. Kullandıktan sonra, lütfen cihazın gücünü kapatın, fişini çekin ve Cihaz soğutun.
2. Yumuşak bir temizlik bezini biraz suyla nemlendirin ve ardından epilasyon cihazını, özellikle de cihazın temas yüzeyini temizlemek için kullanın.
3. Cihazı kuru, tozsuz bir yerde saklayın ve su birikintilerinden uzak tutun.

## UYARILAR!

- Herhangi bir kızarıklık, kabarcık veya yanık varsa, lütfen epilasyon cihazını **KULLANMAYI DERHAL BIRAKIN!**
- Lazer dalgalarını aynı vücut bölgesine tekrar tekrar ateşlemekten kaçının!

## KONTRENDİKASYONLAR:

- Hamile veya emziren kadınlar veya adet dönemleri için uygun değildir.
- Egzama, sedef hastalığı, yaralanma, yara veya iltihaplanma olan kişiler için uygun değildir.
- Fiziksel yara izleri olan kişiler için uygun değildir.
- Işığa duyarlılık veya diyabet öyküsü olan kişiler için uygun değildir.
- Son 6 hafta içinde ağda epilasyonu, tüy yolma gibi diğer epilasyon yöntemlerini kullanmış kişiler için uygun değildir.
- Son bir hafta içinde cilt rengini açıcı ürünler veya A vitamini içeren ürünler kullanmış kişiler için uygun değildir.
- Aynı zamanda uçucu yağ tedavisi gören kişiler için uygun değildir.
- Bağışıklık sistemini baskılayıcı aspirin alan kişiler için uygun değildir.
- Son iki hafta içinde güçlü güneş ışığına maruz kalmış kişiler için uygun değildir.
- Mukoza zarları ve üst göz kapakları, dudaklar, meme uçları ve vajina gibi özel bölgeler gibi hassas bölgeler için uygun değildir.

- Dövme veya kalıcı renk değişikliği olan cilt bölgeleri, cilt lekeleri ve doğum lekeleri için uygun değildir.
- Hirsutizm ve komplikasyonlara neden olabilecek diğer rahatsızlıkları olan kişiler için uygun değildir.
- Son 6 ay içinde bir doktorun cilt reçeteli ilacı ile tedavi edilen kişiler için uygun değildir.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Ağırlığı: 260g

Güç: 24W/36W/48W

Güç Kaynağı: AC100V ~ 240V ~ 50 / 60Hz

Enerji Seviyesi: 5 Seviye

Seviye 1: 10,35J - 11,38J

Seviye 2: 12,31J - 13,25J

Seviye 3: 13,7J - 14,55J

Seviye 4: 16.18J - 17.46J

Seviye 5: 17,33J - 18,92J

Alan Spot Boyutu: 3cm<sup>2</sup>

## ÇEVRESEL ÖZELLİKLER

### ● Saklama ve Taşıma

Sıcaklık: 10 °C -55 °C

Nem: 55 °C sıcaklıkta %90

Hava basıncı: 700-1060 hPa

### ● Çalışma Koşulları

Sıcaklık: 50°F - 122°F (10°C -50°C)

Nem: 99 ° F (37 ° C) sıcaklıkta %80'e kadar

Yükseklik: 1900 feet'e (3900 m) kadar

Cihazı doğrudan güneş ışığına veya diğer ışınlara maruz bırakmayın.



## GARANTİ

SHINE, epilasyon cihazına bir yıl boyunca garanti vermektedir. Herhangi bir sorunuz veya öneriniz varsa, lütfen doğrudan bizimle iletişime geçin ve 48 saat içinde sizin için sorunu çözeriz. Sizin için kesinlikle %100 sorumluluk alıyoruz!

## CİLT TESTİ

Bu cihazı yakın zamanda kullandıysanız ve bronzlaştıysanız, cildin tedaviye verdiği yanıtı kontrol etmek için bu bölgelerde bir cilt testi yapmanızı öneririz.

### ● Vücudunuzun tüm bölgeleri için doğru ışık yoğunluğunu nasıl anlarsınız?

1. Uygulamak istediğiniz bölgeye yakın bir alan seçin.
2. Cihazı açın ve aygıtın seviye 1'e ayarlı olduğundan emin olun.
3. Cihazı cildin üzerine yerleştirin, ardından flaşı serbest bırakmak için flaş düğmesine bir kez basın.
4. Cihazı uygulama için ciltteki bir sonraki bölgeye kaydırın.
5. Kabul edebileceğiniz en yüksek seviyeyi test edene kadar bu işlemi tekrarlayın.
6. Cilt testinden sonra, cildinizde herhangi bir reaksiyon olup olmadığını kontrol etmek için 24 saat bekleyin. Cildiniz reaksiyon gösterirse, kabul edebileceğiniz ancak daha sonraki cilt reaksiyonlarına neden olmayacak en yüksek seviyeyi seçin.

## SORULAR & CEVAPLAR

Bu cihazı yakın zamanda kullandıktan sonra bronzlaştıysanız, cildin tedaviye verdiği yanıtı kontrol etmek için bu bölgelerde bir cilt testi yapmanızı öneririz.

Q Etkisini ne zaman görebilirim?

A Yaklaşık 4-8 hafta süren kişisel bakım tedavisi, çoğu kullanıcı tüylerin azaldığını açıkça hissedecektir. Kalıcı epilasyon elde etmek için, bazı vücut bölgelerine 6 ay, 9 ay, 12 ay boyunca farklı zamanlarda kontrol bakımı yapılması gerekir.

**Q Hangi durumlarda kullanılamaz?**

**A** Aşağıdaki durumlara sahip bireyler için önerilmez:

1. Hamilelik veya emzirme öncesi.
2. Cildin ışığa karşı alerjisi veya başka cilt hastalıkları varsa.
3. Dövmeler, doğum lekeleri, akne izleri, benler, çiller ve diğer düzensiz cilt tonu alanları
4. Saç çizgisi saçın bir parçasıdır ve tavsiye edilmez.
5. Yapay tabaklanmış cilt...

**Q Erkekler deneyebilir mi?**

**A** Evet, ancak yüz ve sakal için önerilmez.

Erkek androjeninin güçlü salgılanması epilasyonun etkisini etkileyebilir ve epilasyonun etkisi kişiden kişiye değişir.

**Q Etkisi güzellik salonu ile aynı mı?**

**A** Etki aynıdır. IPL teknolojisinin yanı sıra, lazer veya donma noktası tedavisi kalıcı epilasyon işlevine sahiptir. Buradaki kalıcılık gerçekten kalıcı değildir. Kalıcı epilasyonun doğru anlaşılması, IPL / Lazer epilasyondan sonra kılın bir kıl büyüme döngüsü sırasında yeniden çıkmayacağı şeklinde olmalıdır.

**Q Kullanım sırasında acı verir mi, güvenli mi?**

**A** Kullanım sırasında sıcak bir his olacaktır. 5. seviyede biraz karıncalanma olabilir yüksek enerjiden dolayı his. Daha düşük bir seviyede kullanabilirsiniz ve kesinlikle güvenlidir.

**Q Ürün otomatik olarak kapanacak mı?**

**A** Ürünümüz otomatik koruma fonksiyonu ile donatılmıştır. Bekleme modunda, 5 dakika içinde otomatik olarak kapanacaktır.

**Q Cihazı kullanırken cildim neden ağrılı veya daha hassas hissediyor?**

**A**

1. Kullandığınız ışık yoğunluğu çok yüksek. Doğru ışık yoğunluğunu yeniden seçin. Lütfen ilk kullanım için en düşük ışık yoğunluğundan başlayın.
2. Tedavi edilecek bölgedeki tüyleri tamamen tıraş etmediniz. Bu cihazı kullanmadan önce cildinizdeki tüyleri tıraş edin.
3. Temas yüzeyi penceresi kırılmış. Pencere kırılmışsa, cihazı kullanmayın. Lütfen bizimle iletişime geçin ve sorunu çözmeye yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız.



## KONTAK **EASTMEDİKAL**

### İletişim Bilgileri

Eastmedikal ile iletişime geçmek isterseniz lütfen **eastmedikal.com** adresini ziyaret edin veya e-posta gönderin. **bilgi@eastmedikal.com**

 0850 255 42 42

### Üretici Firma :

**Guangzhou Defond Electronic Technology Co. Ltd.**

2nd Bldg C, No.569, Huangbian North Baiyun District,  
Guangzhou, CHINA

### İthalatçı Firma :

**EAST MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.**

Fevziçakmak Mah. Yakamoz Cd. No:11/C Büsan Organize Sanayi  
42050 Karatay KONYA

# GARANTİ BELGESİ

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMANIN :

ÜNVANI: EAST MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES : FEVZİÇAKMAK MAH. YAKAMOZ CD.

NO:11/C KARATAY/KONYA

Müşteri Hizmetleri : +90 (850) 255 42 42

Firma İmza ve Kaşesi :



**EAST** EAST MEDİKAL  
MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.  
Fevziçakmak Mah. 10659. Sk. Yakamoz Cd. No:C11  
Tel: 0533 693 25 42 Karatay/KONYA  
Selçuk V.D 3231 205 560

Azami Tamir Süresi : 30 Gün

Garanti Süresi : 1 Yıl

Belge Numarası : .....

Belge Tarihi : .....

Markası : **Defond** .....

Modeli : **HP-01** .....

Cinsi : **El Tipi IPL Cihazı** .....

SATICI FİRMANIN :

Ünvani : .....

Adresi : .....

Tel : .....

Fatura Tarihi ve Numarası : .....

Tarih : ...../...../202...

İmza :

KAŞE

Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar.



# GARANTİ BELGESİ

Aşağıdaki şartlar yerine getirildiği takdirde, ürünlerin garanti süresi içinde bedelsiz olarak onarımı söz konusudur.

## GARANTİ KAPSAMI DIŞINDAKİ HALLER:

1. Malın tüketiciye tesliminden sonra nakliyeden kaynaklanan hasarlar, darbeler, (çarpma, kırma, çizme, kimyasal, elektrokimyasal ve elektronik etkiler) kullanılan tesisattan kaynaklı hatalar,
2. Ardından, tarafından yapılan yanlış depolama ve orta koşulları,
3. Kaynak sorunları (doğal afetler, yangın, su baskını vb. felaketler),
4. **SU SIÇRAMALARI** Sonucu elektronik veya mekanik parçalara verdiği hasarlar,
5. Cihaz kullanırken veya ilk devreye alınana kadar emin olun orta koşullarının uygun olmamasından doğan sorunlar (toz, temizlik, kurum, kapak, su, nem, bakım eksikliği, vb.)
6. Kireç, çamur, çapak, demir ya da pisliklerinden meydana gelen kullanacağınız suda tıkanıklık ve hasarlar
7. Cihaz sıcak iken soğuk su verilmesi ya da cihazın susuz çalıştırılması sonucu meydana gelen hasarlar
8. Elektrik tesisatında sigorta kullanımı, elektrik tesisatında topraklamadan kaynaklanması sorunlar. Kaynaklanan veya elektrik tesisatından dolayı meydana gelen yüksek ya da alçak ihtiyaçtan kaynaklanan veya elektrik tesisatından dolayı meydana gelen hasarlar.

## GARANTİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Satıcı, malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiç bir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.[2]  
Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın:

1. Tüketicilere teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
2. Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
3. Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
4. İmalatçı-üretici veya ithalatçılar, garanti belgesi ile sattıkları malların bakım onarım ve kullanımına ilişkin satış sonrası servis hizmetlerini yeterli olarak vermek ve bunun için gerekli tedbirleri almak zorundadır.
5. Tüketicinin bu taleplerine karşı satıcı, bayii, acente, imalatçı - üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludurlar.
6. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.