

# Moji AI Cilt Test Cihazı - Max

## Kullanma Klavuzu





# İÇİNDEKİLER

- Cihaz fonksiyonlarının konumlandırılması
- Çalıştırma süreci
- Fonksiyon açıklaması
- Prodüksiyon yönetimi



1



Cihaz fonksiyonlarının konumlandırılması



## Cihaz fonksiyonlarının yerleştirilmesi



● Emoji AI Cilt Test Cihazı-Maks Sürüm, beyaz ışık, pozitif polarize ışık, negatif polarize ışık, UV ışığı, mavi ışık, Wu ışığı, kahverengi ışık ve kırmızı ışık gibi 8 ışık kaynağı ile endüstriyel sınıf yüksek çözünürlüklü efektler aracılığıyla yüz cildinin görüntülerini yakalar. Yüzeysel ve derin cildin patolojik özellikleri üzerinde nicel analiz yapmak ve cilt sağlığı için 14 göstereyi kapsamlı bir şekilde tespit etmek için spektral görüntüleme, AI yüz tanıma, derin öğrenme, 3D cilt simülasyonu, bulut hesaplama / bulut depolama teknolojilerini benimser. Cilt sorunlarının kapsamlı analizi ve değerlendirilmesi, cildin bilimsel ve doğru yönetimi için makul kanıtlar sağlar.



2

# İşletme prosedürleri



# Paket açma önlemleri



- ① Dış kutunun üst katmanını açın ve ürün kılavuzu ile uygunluk belgesini kontrol edin.
- ② strafor köpüğü çıkarın ve ardından alet yuvasını, güç kablosunu ve renkli işaretleyici setini çıkarın.

Güç kablosu ve renkli işaretleyici seti strafor köpük alt kısmındaki kart yuvasında bulunmaktadır.


- ③ Cihaz bağlantısının güç kablosu: İlk kullanımda, öncelikle güç kablosu fişinin koruyucu kapağını çıkarın, fişi prize takın ve diğer ucunu cihazın arka tarafındaki güç girişine sıkıca takın.
- ④ Güç Açma: Cihazın arka kısmındaki kırmızı düğmeye basın; güç gösterge ışığı yanacaktır; bu, gücün başarılı bir şekilde açıldığı anlamına gelir.



# WiFi ağına bağlanma

Cihaz açıldıktan sonra, tablet masaüstünün sağ üst köşesinde WIF ayarı logosunu bulun, ona tıklayın ve "Ağ ve İnternet" seçeneğini bulun, ardından WIFİ anahtarını açın ve ilgili WiFi ağını arayın. Sahada bir ağ kablosu varsa, ağ kablosunun fişini doğrudan cihazın arkasındaki ağ kablosu arayüzüne takabilirsiniz; çalışma daha sorunsuz olacaktır.

Not: Tablet sisteminin alt kısmında bulunan gezinme tuşları aracılığıyla esnek bir şekilde kullanılabilir.

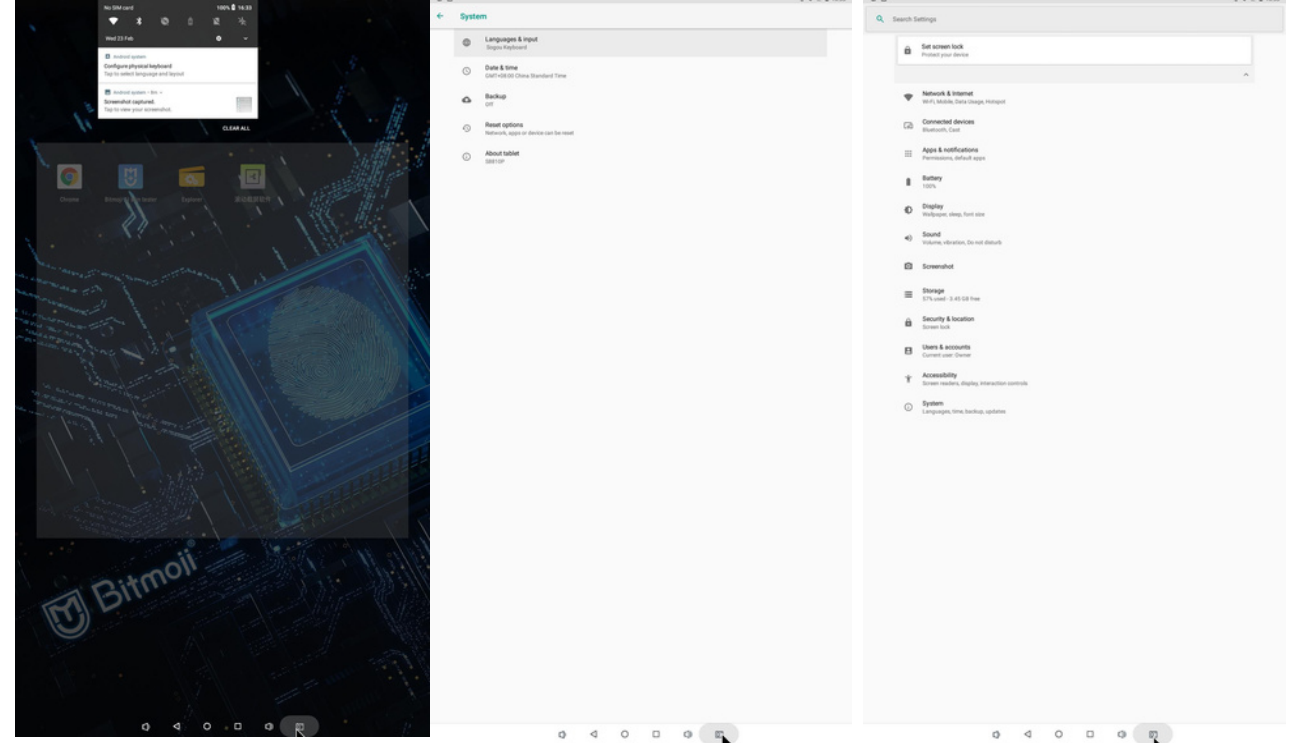





## Kayıt ve Oturum Açma



Tablet masaüstündeki "Moji AI Skin Tester" simgesine tıklayarak test sistemi arayüzüne erişebilirsiniz. Yeni kullanıcılar için hemen kayıt olmak için ilerleyin. Şirket adını, mağaza adını veya kullanıcı adınızı girin, ardından cep telefonu numaranızı veya e-postanızı ekleyerek doğrulama kodunu alın. Şifrenizi belirleyin, onaylamak için tekrar girin ve son olarak Kaydol'a tıklayın. Daha sonra Giriş'e geçebilirsiniz. (Not: Mevcut bir hesabınız varsa, cep telefonu numaranızı veya e-posta adresinizi ve şifrenizi doğrudan girebilir, hesap numaranızı veya şifrenizi hatırlamayı seçebilirsiniz).



# Yapay zeka AI cilt testi



Sayfa giriři: Bařarılı bir giriř yaptıktan sonra Moji AI Smart Skin Tester'ın ana sayfası açılacaktır. Test dıř görünümünü ilk kez alan müşteriler, Dosya Ekle'ye girmek için doğrudan "AI Dıř Görünüm Testi"ne tıklayabilir.

Dosya Ekle: Üye müşterinin adını, cinsiyetini ve yaşını sırasıyla doldurun (Not: daha doğru takip testi ve analiz için gerçek yaş girilmelidir), cep telefonu numarasını ve isteğe baėlı olarak üye yıldız derecelendirmesini ve tavsiyede bulunan; Fotoğraf çekimine girmek için bilgileri bařarıyla doldurduktan hemen sonra Kaydet'e tıklayın.



# Yapay zeka AI cilt testi




Fotoğraf çekiminde: Fotoğraf çekerken cihazın altındaki yumuşak desteğe çenenizi yerleştirin ve yumuşak desteğin ön yuvasını aşmayın, alnınızı üst alın desteğine dayayın ve burun orta hattını hizalayın (alnın orta çizgisi işaretlenebilir).

Müşterilerin yüzlerini fotoğraf çekerken temiz tutmaları ve gözlerini kapatmaları gerekmektedir. Ardından fotoğraf çekimine başlamak için akıllı cilt testine tıklamaları gerekmektedir. Fotoğraf çekim sırasında ışık 8 kez yanıp sönecek ve sürekli olarak sekiz yüz görüntüsü toplayacak, görüntü verileri AI akıllı analizi için bulut sunucusuna yüklenecektir.



# Görüntü yakalama arabirimi

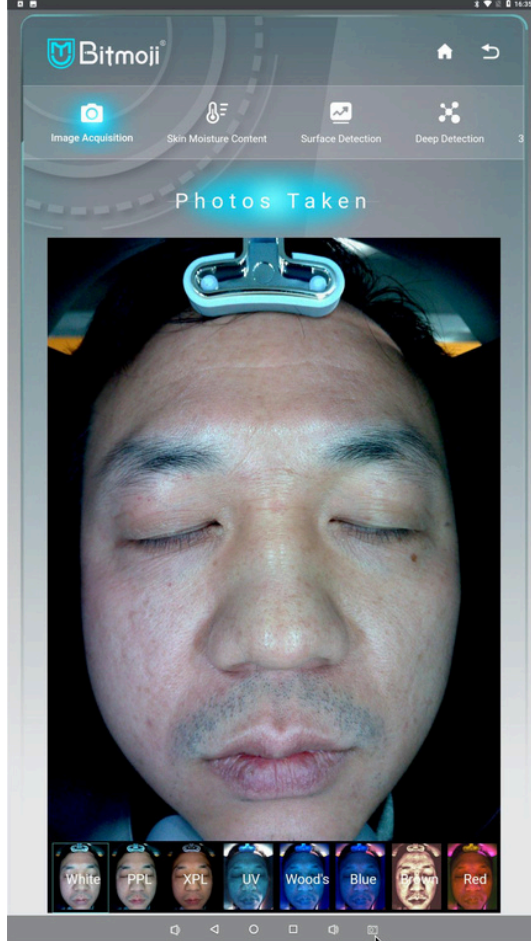

Görüntü yakalama üzerine tıkladığınızda arayüzün alt kısmında 8 yüz fotoğrafı belirecektir. Yüzün yanlış yerleştirilmesi, tutarsız yüz ifadeleri ve açıkta kalan görüntülere neden olan eksik gölgelendirme gibi herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol etmek için sırayla 8 yüz görüntüsüne tıklayın. Evet ise, lütfen tekrar çekim yapın.

**Beyaz, PPL, XPL, UV, Ahşap, Mavi, Kahverengi, Kırmızı.**







## Nem Oranı

"Cildin Nem İçeriđi" etiketli simgeye tıklayın, daha sonra sađ üst köşedeki anahtar simgesine tıklayın. Simge yandıđında açıktır. Renkli kalemı çıkarın, kalem kapađını çıkarın ve renkli kalemin alt kısmındaki düğmeye elinizle basın. Renkli işaretleyicideki yeşil ışık yanıp söndüğünde ve ekran arayüzünde "bađlandı" kelimesi görüldüğünde kullanılabilir. Cilt test alanına yaklaştırmak için test temas başlıđının bir ucuna basın ve nem içeriđi test sonuçları ekran arayüzünde görünene kadar yaklaşık 3 ila 5 saniye bekleyin. Son olarak nem içeriđi testini tamamlamak için aşıđıdaki Gönder düğmesine tıklayın.





3

## Fonksiyon Açıklaması



# Yüzey testi arabirimi




Arayüzün üst kısmındaki yüzey testi simgesine tıkladığınızda, 5 yüzey boyutunun test görüntüsü analizi (sırasıyla sebum, gözenekler, pigmentasyon, kırışıklıklar ve sivilce vardır), karşılık gelen niceliksel analiz, önlemler ve önerilen çözümler görünecektir.

Her müşterinin analiz raporu, QR kodunu tarayarak cep telefonuna görüntülenebilir ve kaydedilebilir.



# Analitik gösterge

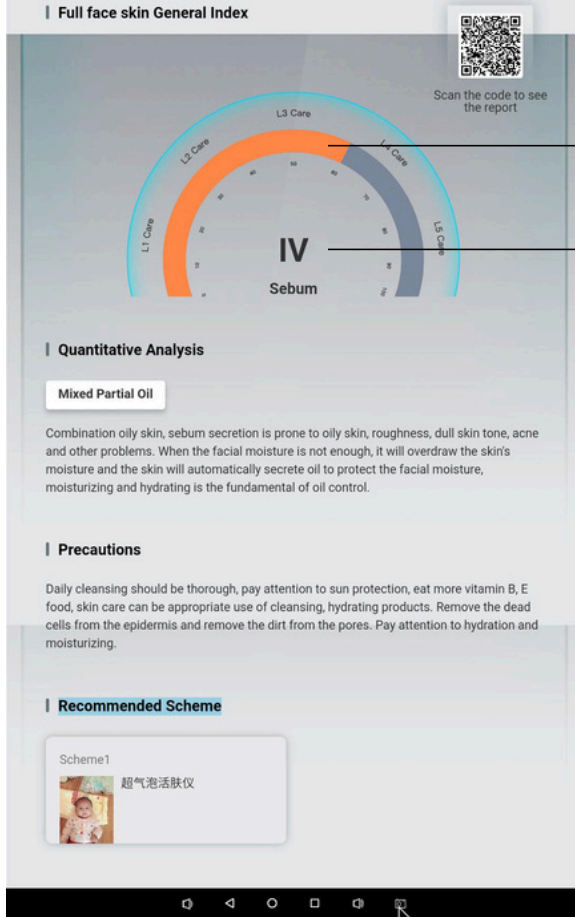

Bakım derecesi algoritması benimsenmiş ve 1'den 5'e kadar beş dereceye ayrılmıştır.


Cilt sorunu, ne kadar yüksek olursa, ciltteki sorun da o kadar ciddi olur.

- Yeşil - Çok İyi - Seviye 1
- Mavi - İyi - Seviye 2
- Sarı - Orta - Seviye 3
- Turuncu - Ciddi - Seviye 4
- Kırmızı - Çok ciddi - Seviye 5





# Analitik analiz

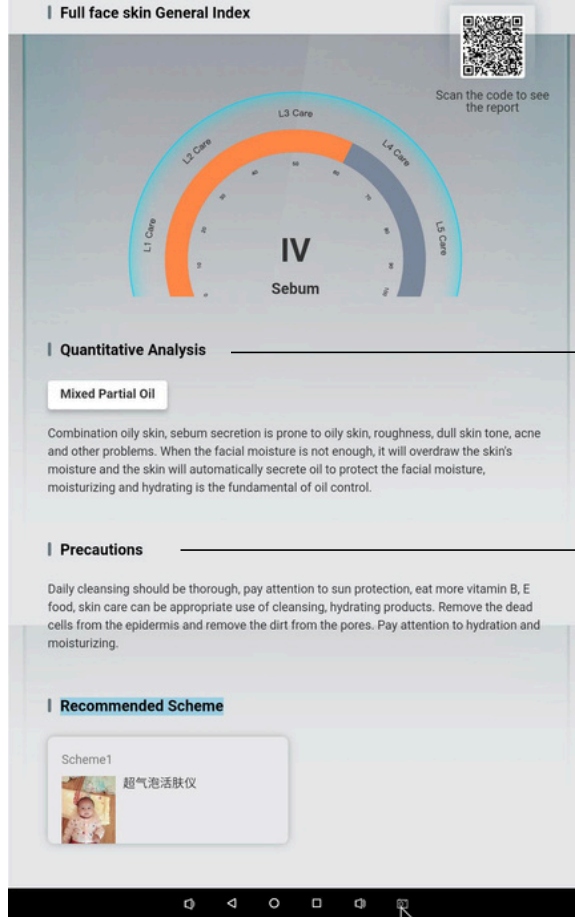


Cilt problemlerinin tanımı, nedenleri ve önlenmesinin analizi.

Günlük bakım önlemleri.




# Önerilen çözüm

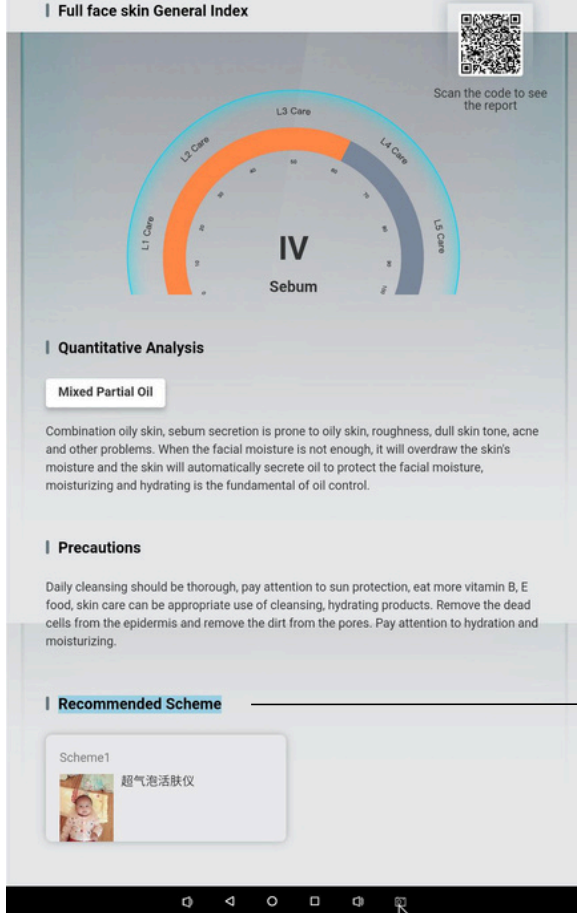

Önerilen çözüm: Test sonuçlarına göre, ilgili bakım çözümü önerilir. Hem önlemler hem de önerilen çözüm, Firma tarafından gerçek ihtiyaçlarına göre cildin ihtiyacı olan ürünler önerilebilir.



# Yüzeysel Sebum Testi Görüntüsü

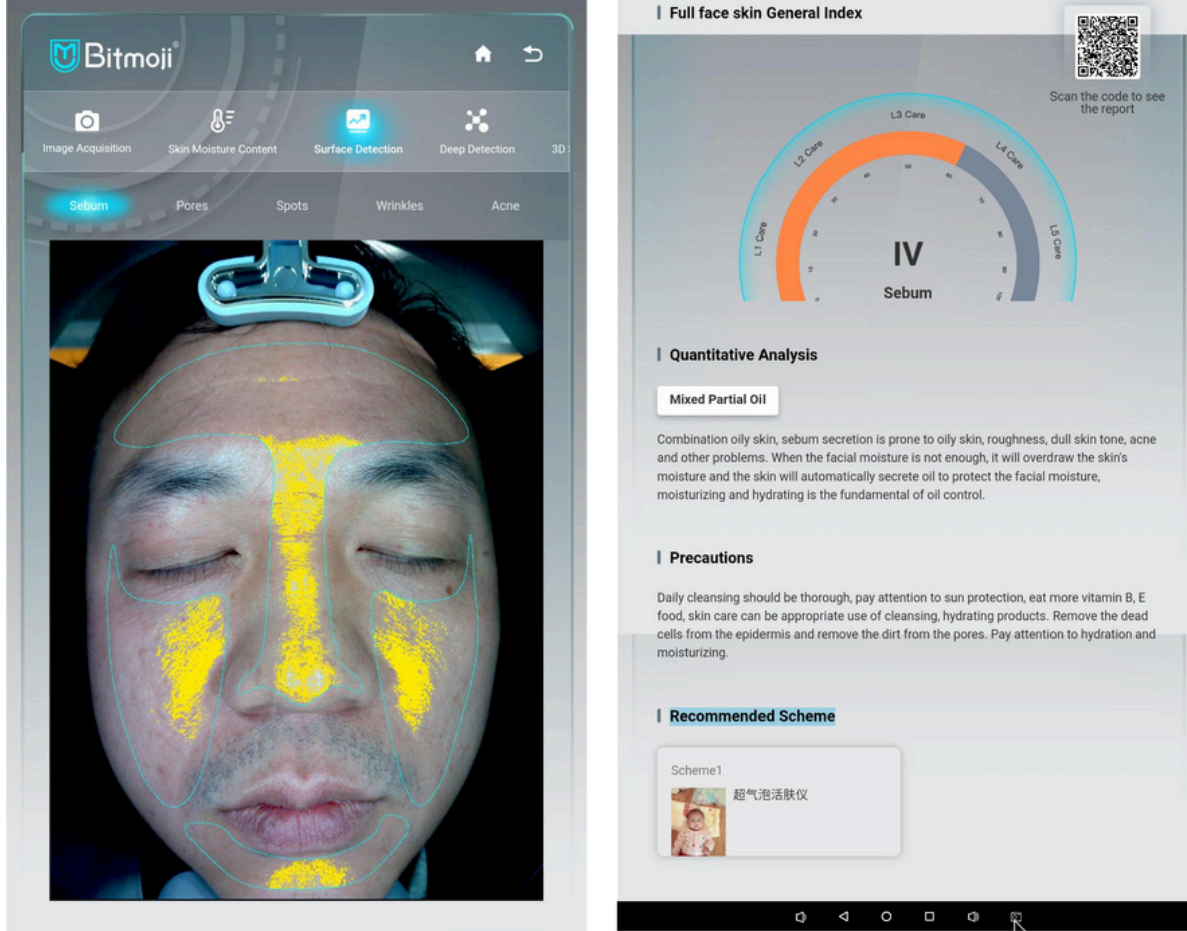

**Test esası:** Serbest yağ asitlerinin cilt yüzeyindeki dağılımı güneş ışığı altında açıkça gözlemlenir.



**Fotoğrafa bakın:** Sarı işaretlenen alan daha fazla yağ salgıladığını gösterir.

Sarı simgeler, daha fazla yağ salgısı.

**Seviye:** Resimde turuncu renk gösterilmektedir, bu Seviye 3 bakımı ve yağ salgısının orta düzeyde olduğunu gösterir.



# Yüzeysel Gözenek Testi Görüntüsü

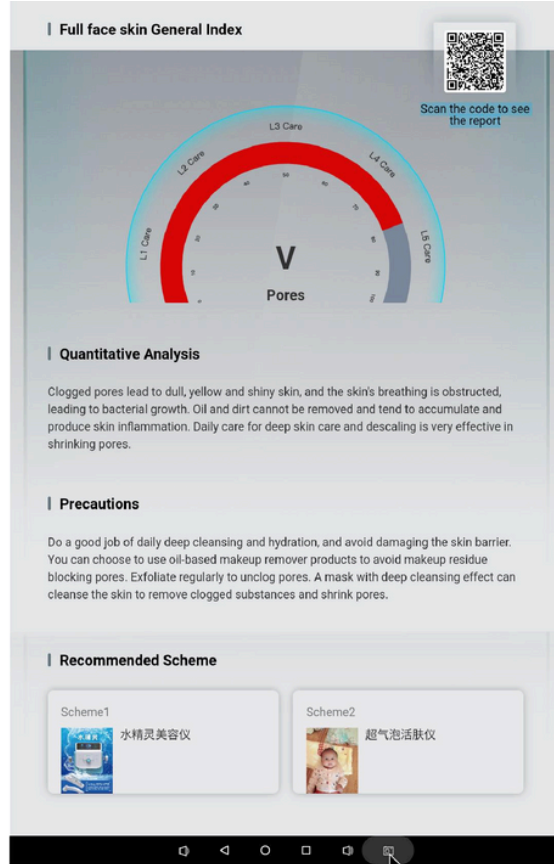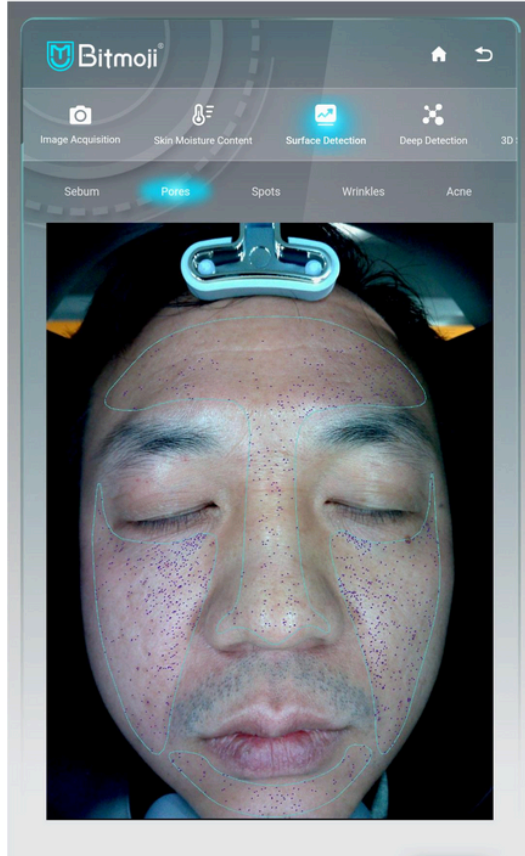

**Test yöntemi:** Cilt yüzeyinde kırılan ışık, polarize ışık teknolojisi ile filtrelenir, böylece cilt yüzeyindeki gözeneklerin dağılımı ve büyük gözenekler net bir şekilde belirlenebilir.


**Fotoğrafa bakın:** Mavi kısa ve ince çizgi işaretleri, büyük gözeneklerin dağılımını temsil eder.

**Şiddet:** Beş seviyede gösterilen kırmızı işaretler, genişlemiş gözeneklerin ciddiyetini yansıtır.





# Küçük Nokta Testi Görüntüsü

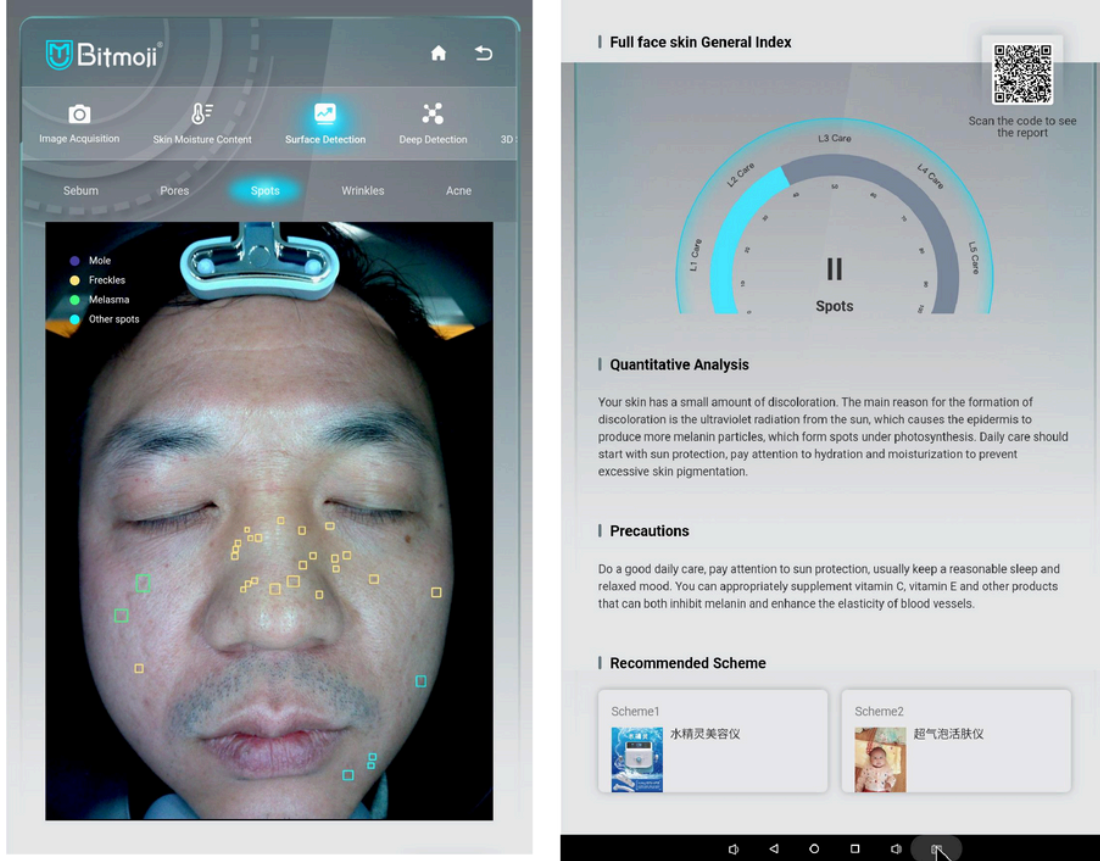


**Test prensibi:** Cilt yüzeyinde kırılan ışığı filtrelemek için polarize ışık teknolojisi kullanılarak açık kahverengi, sarı-kahverengi, koyu kahverengi, açık sarı veya koyu kırmızı görünür ve farklı cilt lezyonlarını temsil eder.

**Fotoğrafa bakın:** Sol üst köşede 4 farklı renkle işaretlenmiş açıklama simgeleri bulunmaktadır (mor simge benleri, sarı simge çilleri, yeşil simge kloazmayı ve mavi simge diğer noktaları temsil eder); Yüzdeki renkler farklı leke problemlerinin dağılımını ve miktarını gösterir. Ne kadar çok etiket olursa sorun o kadar ciddi olabilir.

**Seviye:** Mavi renkle gösterilen Seviye 2, lekelerin hafif ila orta dereceli olduğunu belirtir.



# Superficial Wrinkle Test Image

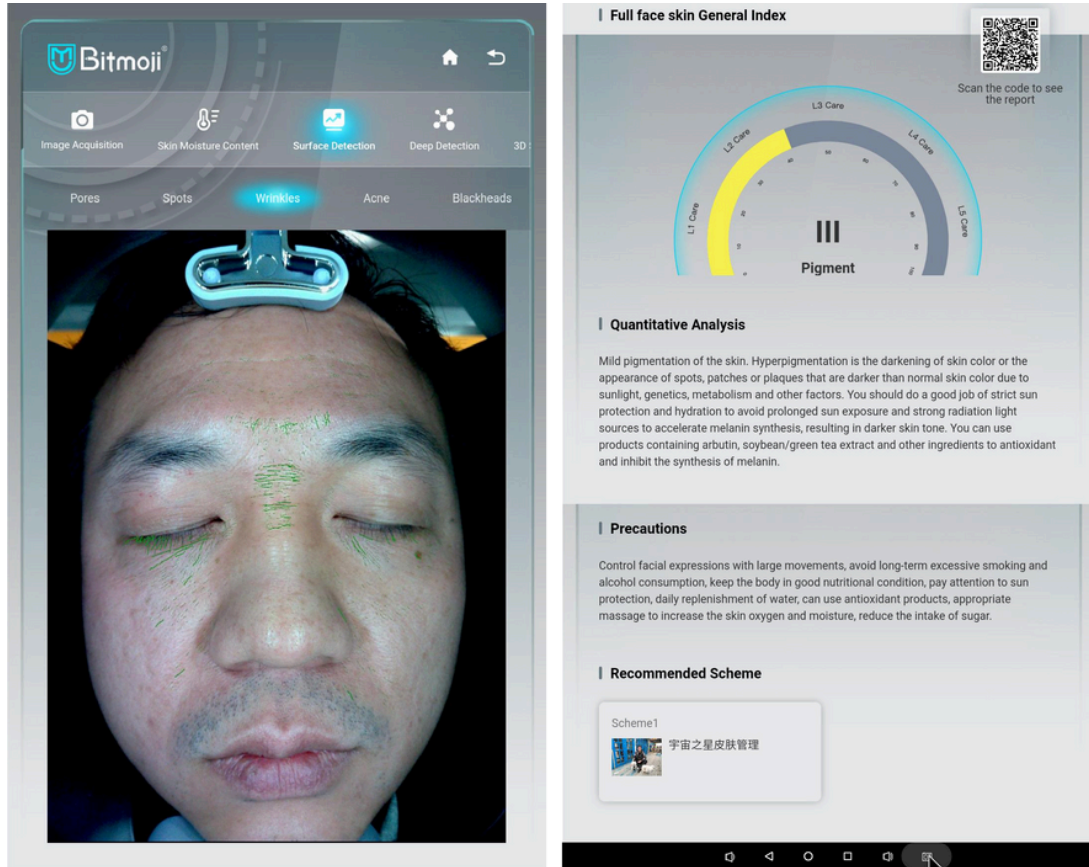


**Test basis:** In the polarized light mode, the development clarity of the skin surface texture can be improved, the skin smoothness, fine lines and wrinkles can be clearly observed, and corresponding nursing-level analysis, precautions and project product recommendations can be made.

**Look at the picture:** The icon of green short thin line in the picture indicates that there are dry lines and fine lines or the loss of collagen in this part.

**Level:** The Level 3 in yellow in the picture indicates the problem of fine lines and dry lines is mild to moderate.



# Yüzeysel Kırışıklık Testi Görüntüsü

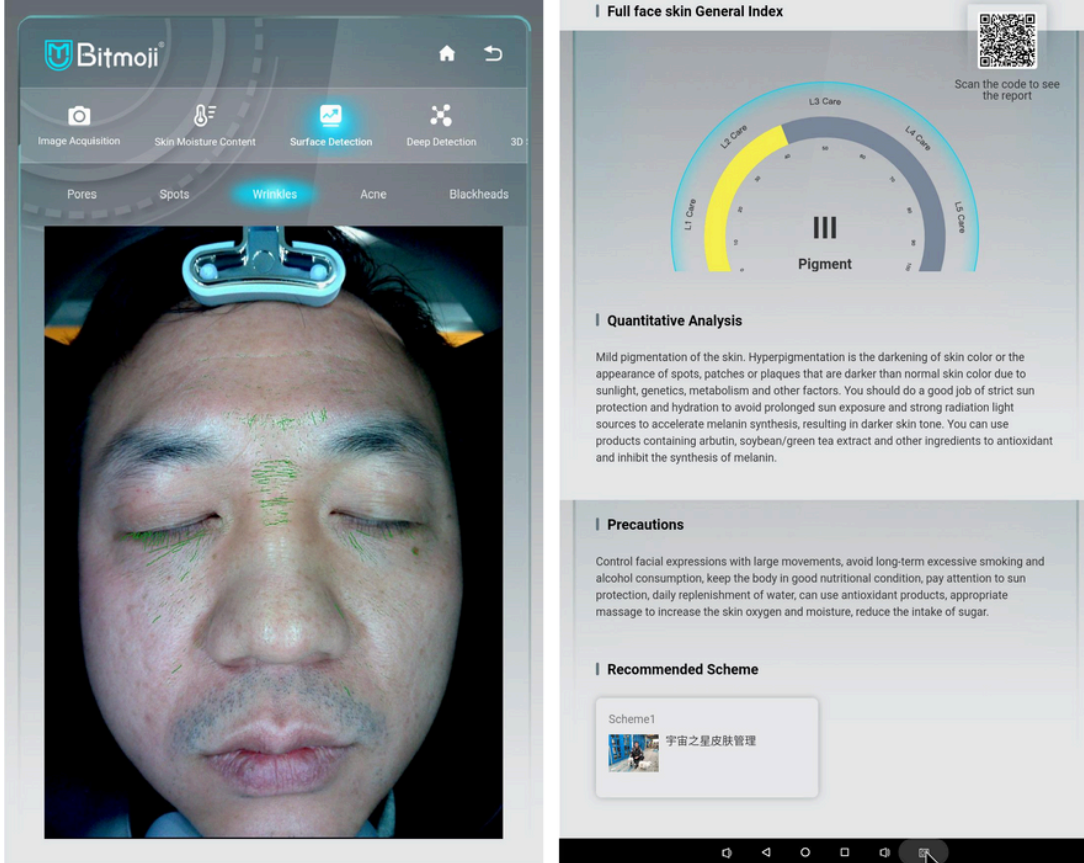



**Test temeli:** Polarize ışık modunda, cilt yüzey dokusunun gelişim netliği iyileştirilebilir, cilt pürüzsüzlüğü, ince çizgiler ve kırışıklıklar net bir şekilde gözlemlenebilir ve ilgili bakım seviyesi analizi, önlemler ve proje ürün önerileri yapılabilir.

**Resme bakın:** Resimdeki yeşil kısa ince çizgi simgesi, bu kısımda kuru çizgiler ve ince çizgiler veya kolajen kaybı olduğunu gösterir.

**Seviye:** Resimdeki sarı renkli Seviye 3, ince çizgiler ve kuru çizgiler sorununun hafif ila orta düzeyde olduğunu gösterir.



# Yüzeysel Akne Testi Görüntüsü

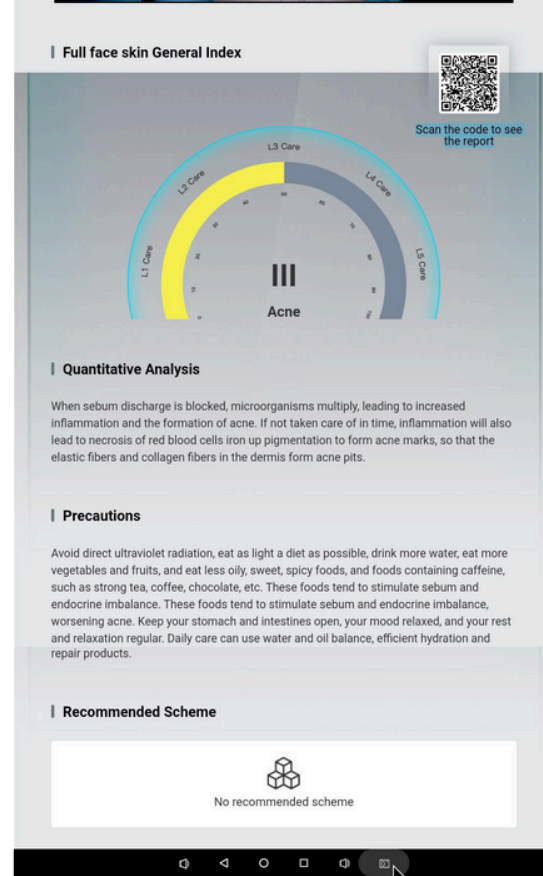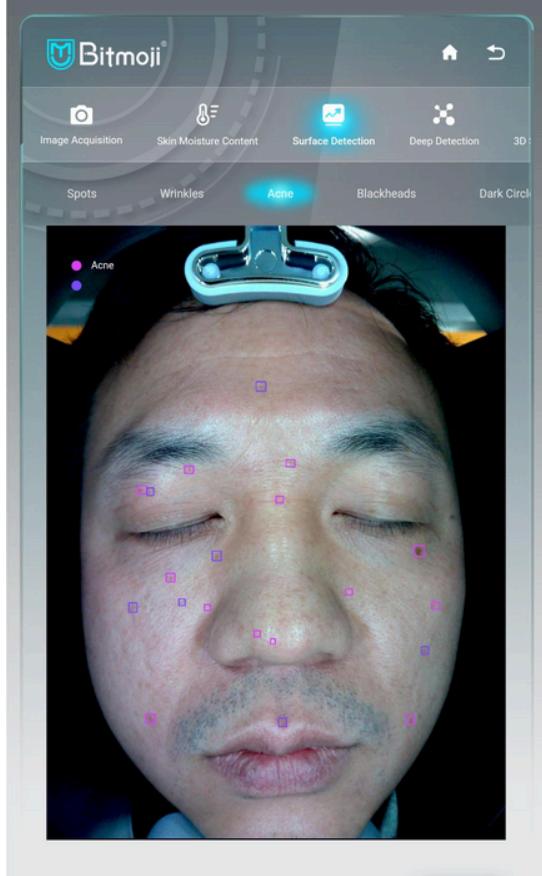

## Test prensibi:

Polarize ışık altında cilt altı sivilcelerinin dağılımı görülebilir.

## Resme bakınız:

Yeşil kısa ince çizgi, kuru çizgiler ve ince çizgilerin varlığını veya bu alanda kolajen kaybını gösterir.



## Seviye:

Sarı renkle vurgulanan Seviye 3, ince çizgiler ve kuru çizgiler sorununun hafif ila orta derecede olduğunu belirtir.





# Yüzeysel Siyah Nokta Testi Görüntüsü

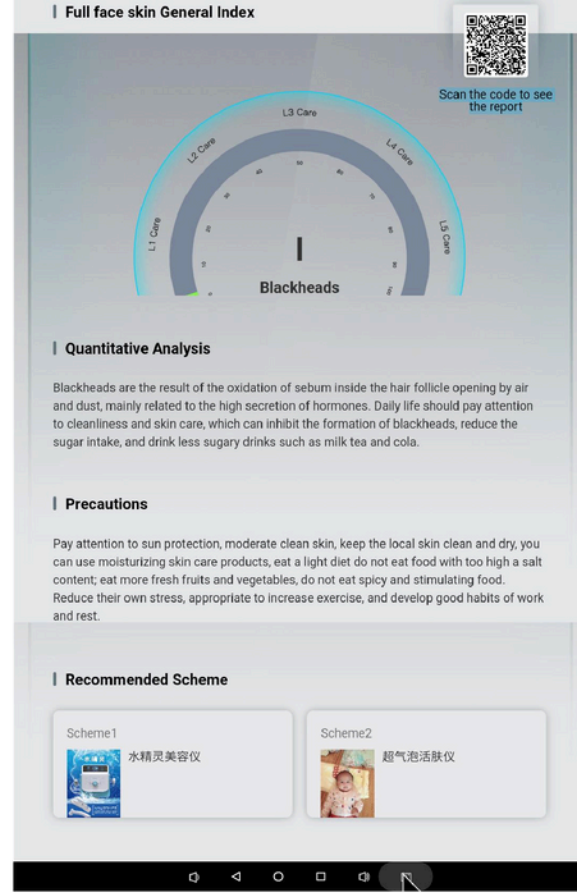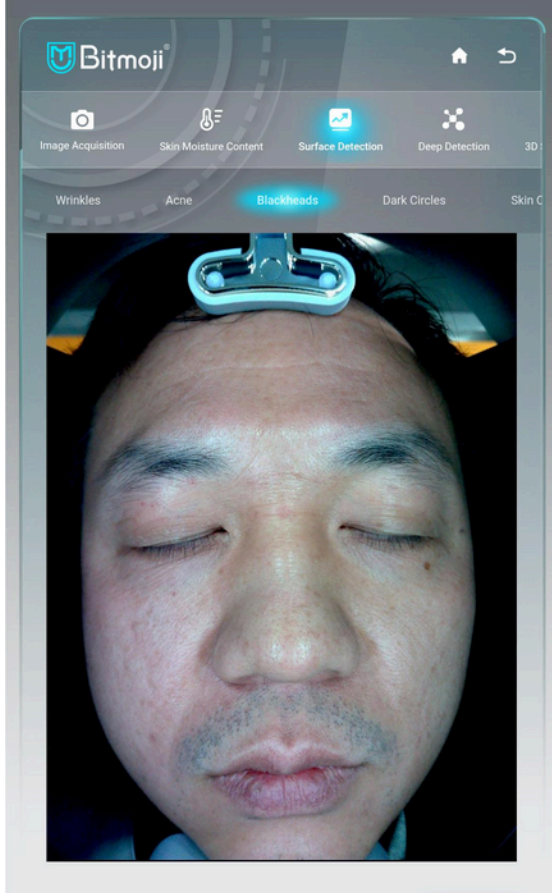

**Test prensibi:** Polarize ışık modunda cilt yüzeyinin altındaki siyah noktaların sayısı ve dağılımı açıkça görülebilir.


**Resme bakınız:** Yeşil kısa ince çizgi, kuru çizgilerin ve ince çizgilerin varlığını göstermektedir.

Kırıklıklar veya bu alandaki kolajen kaybı.

**Seviye:** Resimde iç daire içinde bulunan yeşil işaret, siyah nokta sorununun hafif düzeyde olduğunu gösterir.



# Yüzeysel Koyu Çember Test Görüntüsü

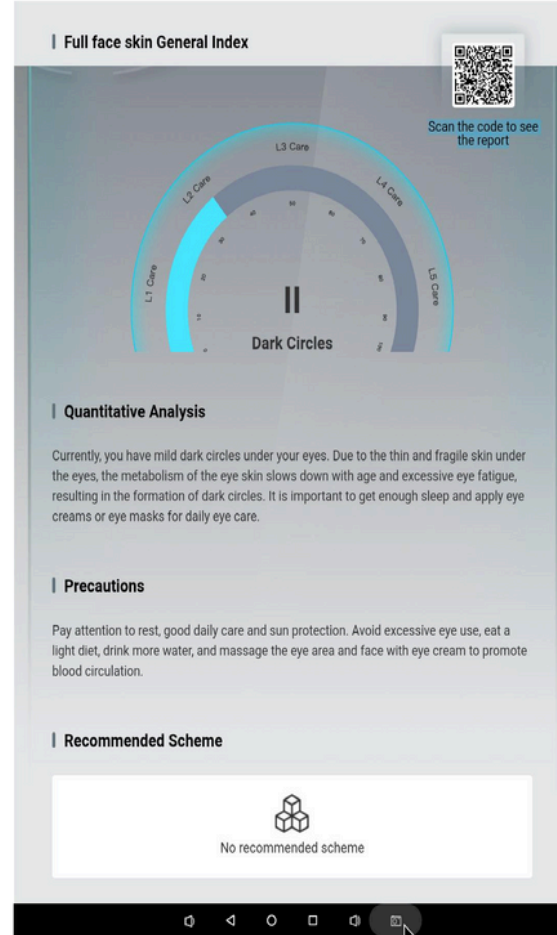

**Test prensibi:** Polarize ışık modunda, kan damarlarının dağılımı ve kalınlığı ile cilt yüzeyinin altındaki cilt rengi, koyu halkalar için bir diyalektik olarak açıkça görülebiliyor.

**Resme bakınız:** Resimde göz hilal çizgisi şeklinin işaretli kısmı koyu renkli daireyi temsil etmektedir.


Pigmentasyonun şiddeti arttıkça, koyu halka da artar.

**Seviye:** Resimdeki daire içindeki mavi renkli Seviye 2, siyah nokta sorununun hafif ila orta derecede olduğunu gösterir.





# Yüzeysel Cilt Tonu Testi Görüntüsü

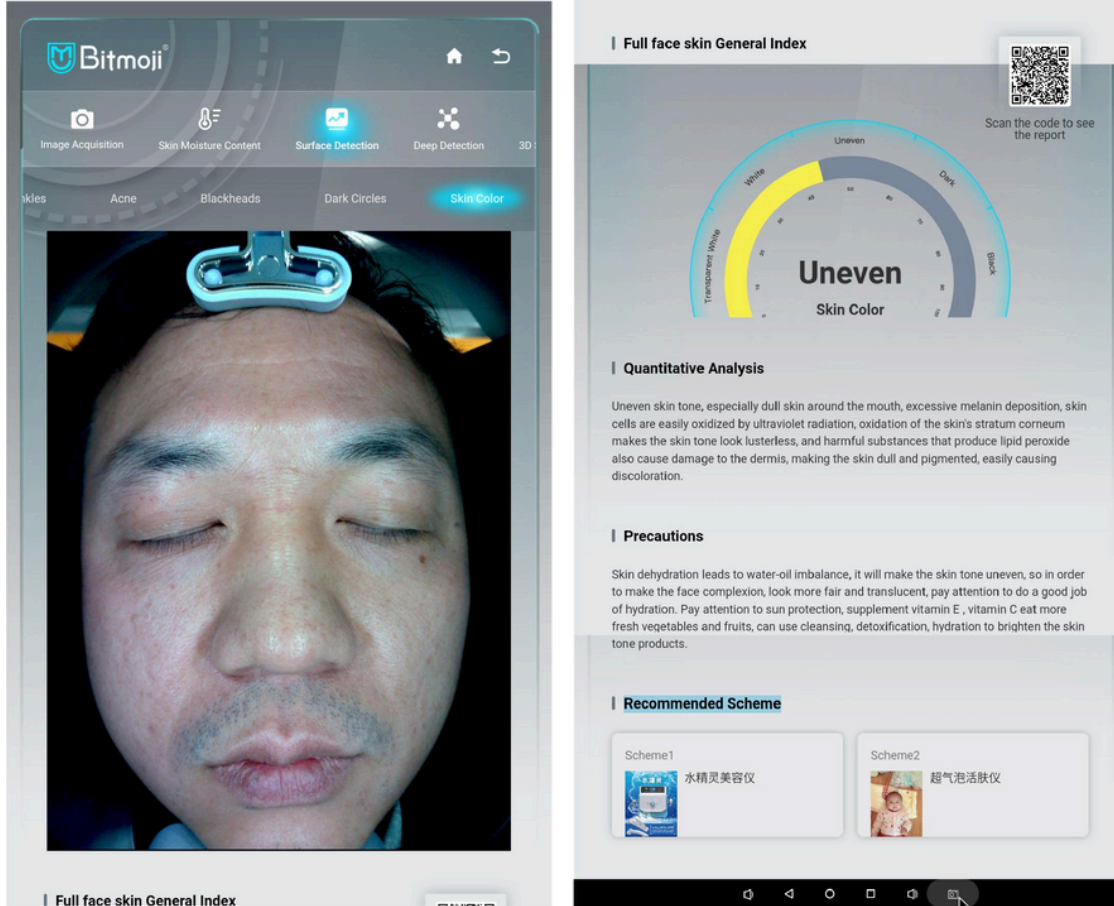

**Test temeli :** Güneş ışığı modundaki cilt tonu görüntüsü, diğer modlardaki cilt görüntülerinin karşılaştırmalı analizi için kullanılabilir.

**Resme bakın:** Pigmentasyon ve akne gibi cilt rengi sorunlarını görüntü üzerinde açıkça gözlemlemek için izler. Daha fazla pigmentasyon daha düzensiz cilt tonu anlamına gelir.

**Seviye:** Şekildeki daire içinde sarı renkle gösterilen Seviye 3 düzensiz cilt tonunu temsil eder.







## Test arayüzü



Arayüzün üst kısmındaki derin test simgesine tıklayarak 5 yüzeysel boyutun test görüntüsü analizini (bunlar sırasıyla PL duyarlılığı, UV lekeleri, UV akne ve kollajen lifleri) inceleyebilirsiniz. İlgili niceliksel analiz, önlemler ve önerilen çözümler bu bölümde yer almaktadır.



# Derin Cilt Hassasiyeti Testi Görüntüsü

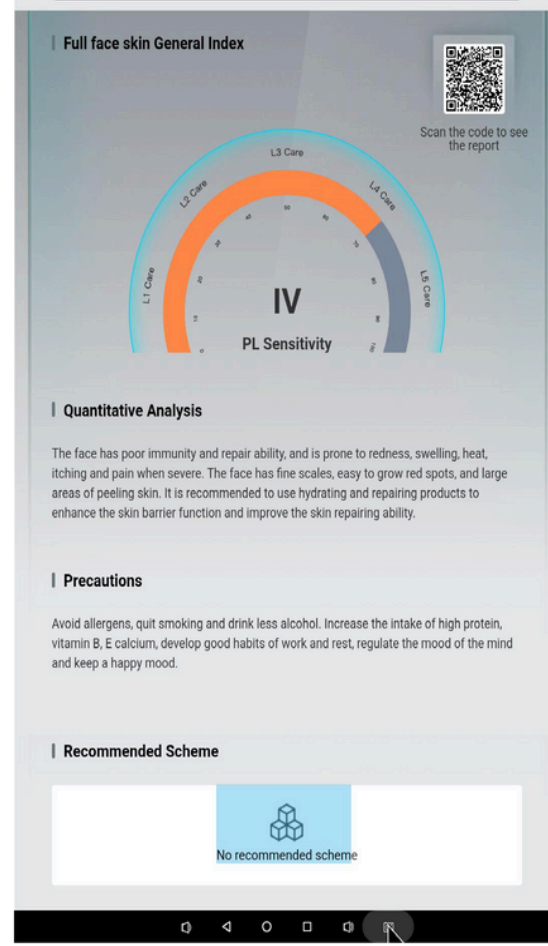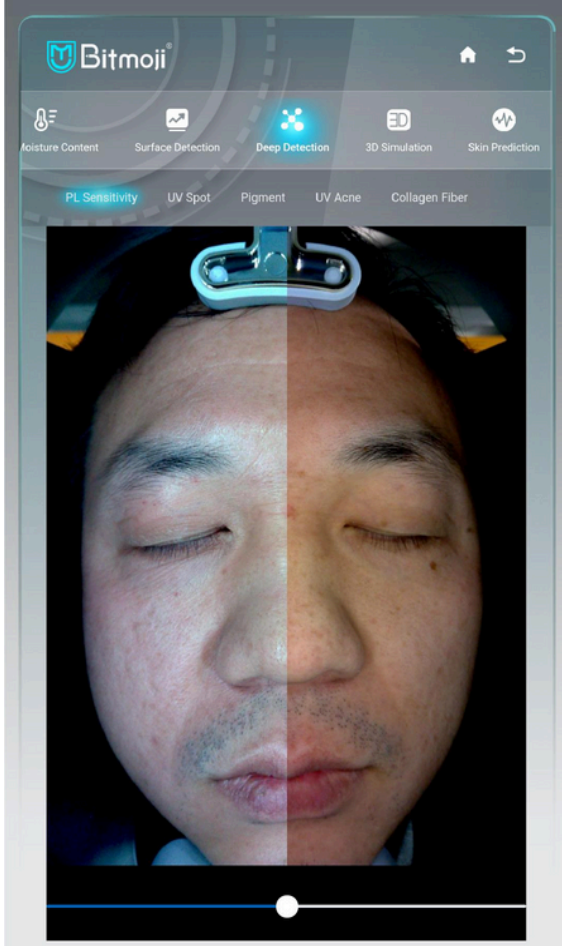


**Test tanımı:** Polarize ışık modu, cilt yüzeyinin altındaki kan damarı pigmentlerinin dağılımını net bir şekilde incelemenizi sağlar. Cildin hassas durumunu belirlemek için uygun ve doğrudur.

**Resme bakın:** Kırmızı kan dağılımı varsa ve keratin çok zayıfsa resmi gözlemleyin, bu da cildin daha hassas olduğu anlamına gelir. Kırmızı akneler varsa cildin alerjik bir dönemde olması cildin alerjik olmasına neden olabilir.

**Seviye:** Resimdeki daire içinde turuncu renkteki Seviye 4, cildin ileri derecede hassas olduğunu gösterir.



# UV Nokta Spektroskopisi Görüntüsü

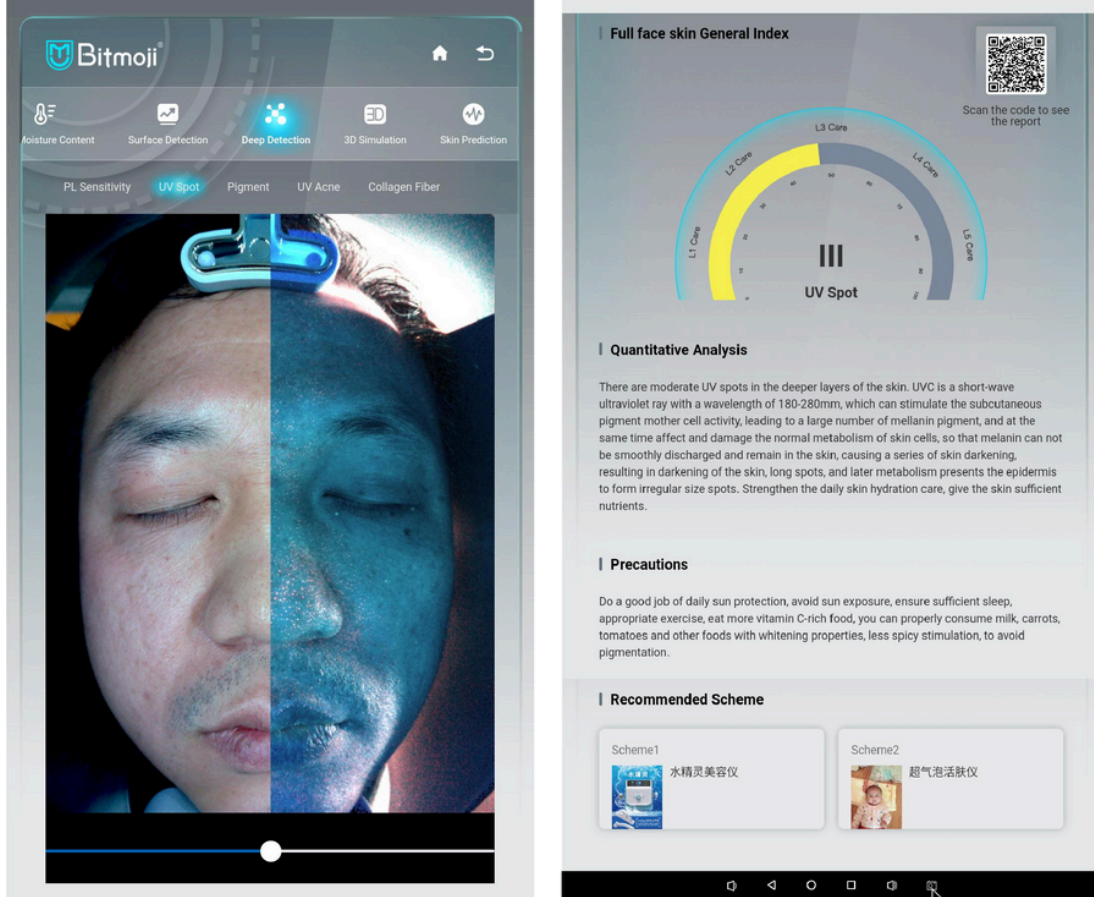

**Test prensibi:** Cildin güneş ışığındaki ultraviyole ışınlardan zarar gördüğünü ve bunun sonucunda cildin daha derin tabakasında melanin birikmesine neden olduğunu gösteren analiz, yüz purpurasının yerini, alanını, şeklini, boyutunu ve klinik şiddetini esas alır. Pigmentasyon bakımı ve tedavisine karar vermek için temel olarak kullanılabilir pigment tonlarının dağılımını değerlendirmek için simgeye basılabilir.


**Resme göz atın:** Siyah veya kahverenginin daha belirgin olduğu bölgelere dikkat edin. Toplanma alanı genişse, yüzdeki pigmentasyon lekelerinin alanının da geniş olduğunu gösterir. Koyu renk, pigment birikiminin yoğun olduğunu gösterir.

**Seviye:** Sarı daire içinde işaretlenen Seviye 3, cilt pigmentasyon probleminin orta derecede olduğunu göstermektedir.





# Derin Pigment Test Görüntüsü

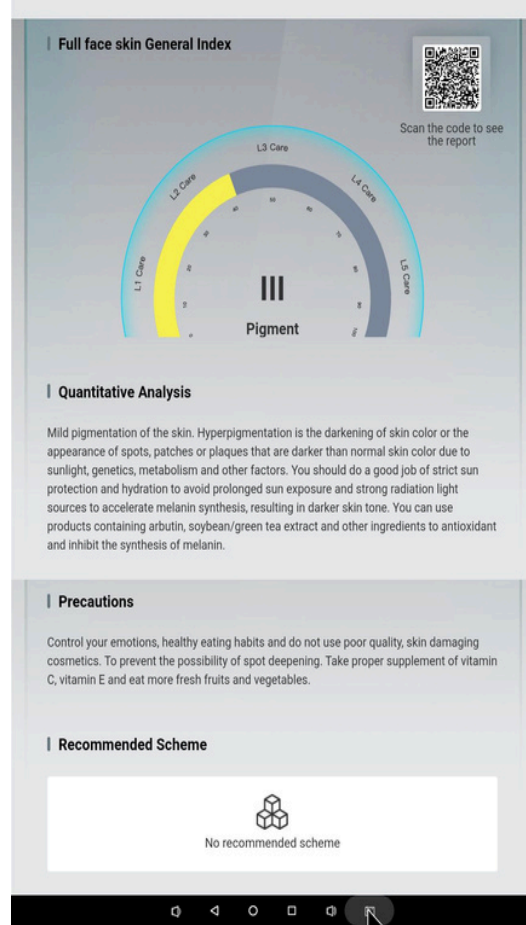



**Test temeli:** Kahverengi ışık modu, melanin, kahverengimsi siyah ve kloazma, çiller, vb. gibi yüksek pigment yoğunluğuna sahip renkli lekeleri algılar.

**Resmi inceleyin:** Kahverengi-siyah pigmentasyon noktalarının yoğunluğunu ve kalınlığını gözlemlemek için resmin kahverengi alanına bakın. Pigmentasyonun derinlik seviyesini belirlemek için simgeyi sola ve sağa kaydırarak pigmentasyonu yüzey pigmentiyle karşılaştırın. Benler dışında, görüntünün sayısal kontrastındaki değişikliklere katkıda bulunan faktörler göz ardı edilmelidir. Pigmentasyon tedavisi öncesi ve sonrası karşılaştırılabilir olmalıdır.

**Seviye:** Sarı daire içinde işaretlenen Seviye 3, cilt pigmentasyon probleminin orta düzeyde olduğunu gösterir.



# Derin Katmanlı Cilt Akne UV Testi

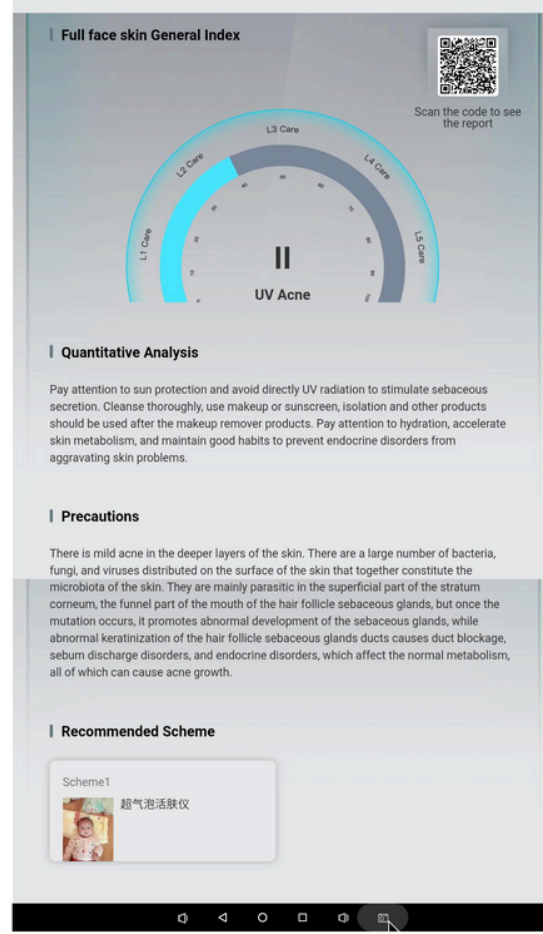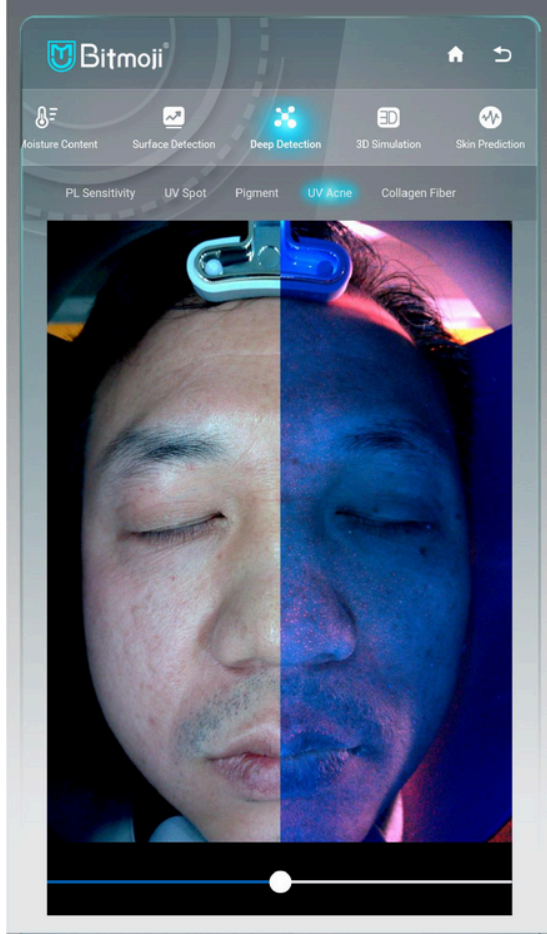

**Test esası:** Yüz derisinin normal florası ultraviyole ışığı emer ve örneğin tuğla kırmızısı Propionibacterium akneleri gibi floresans üretir.



Akne ve sivilce tedavisinde kullanılabilecek cilt florasının içeriğini gözlemleyin, bakım kararınızı bu temele dayandırın.

**Resme göz atın:** Tuğla kırmızısı ve gümüş rengi ışığın dağılımını inceleyin. Dağılım ne kadar yoğun olursa, ciltteki P. aknes içeriği de o kadar artar ve akne görülme sıklığı da o kadar yüksek olur.

**Seviye:** Mavi daire içinde işaretlenen Seviye 2, cilt pigmentasyonu probleminin hafif ila orta derecede olduğunu gösterir.



# Derin Katman Cilt Kolajen Kaybı Testi Görüntüsü

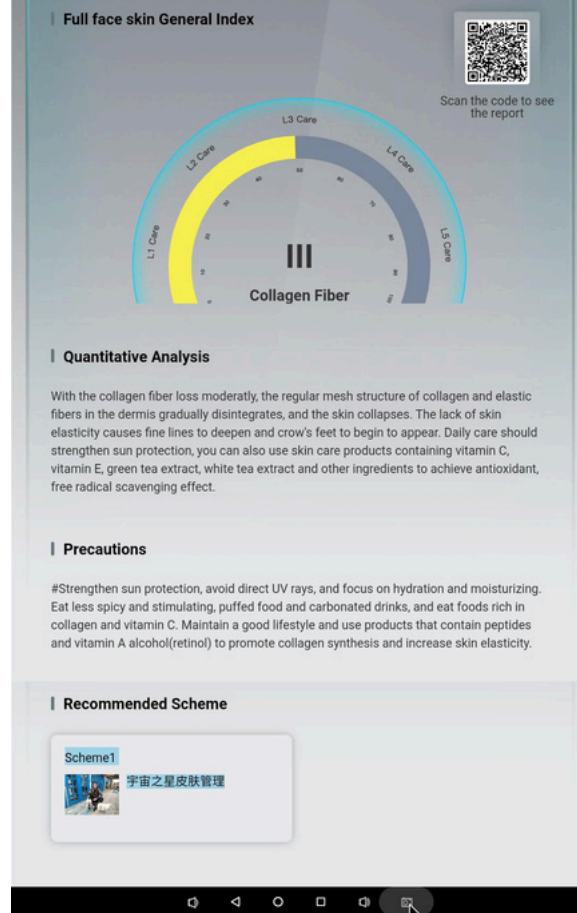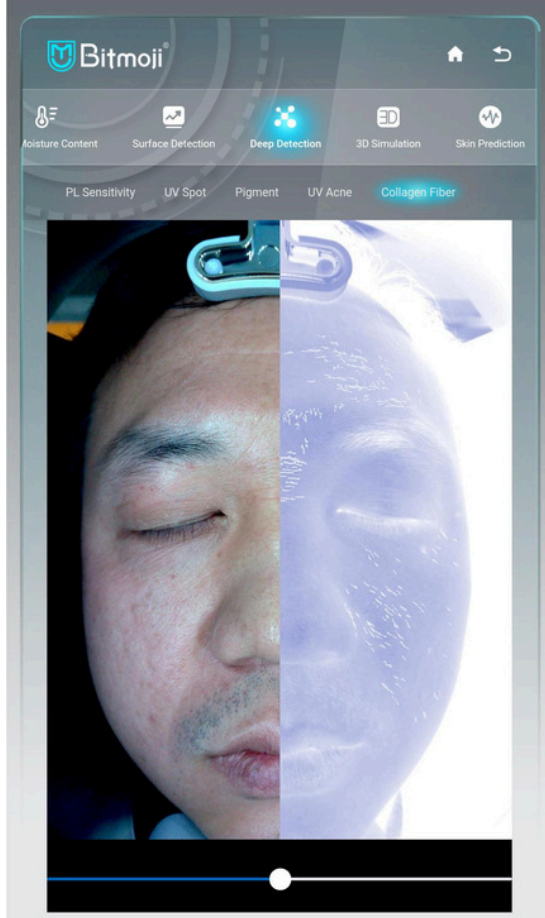

**Test temeli:** Cildin alınındaki kolajen kaybını ve cildin yaşlanma karşıtı bakımının diyalektik ve tahmini için kullanılabilen kolajen ve elastik liflerin floresan etkisi yoluyla cildin düzlüğünü ve elastikiyetini değerlendirmek. Simgeyi sola ve sağa sürükleyerek cildin yüzey ve derin tabakasındaki sorunları görsel olarak karşılaştırabilirsiniz.

**Resme bakın:** Aralıklı floresan dağılımının daha yoğun olduğunu gözlemleyin, bu da çok fazla kolajen kaybı olduğu anlamına gelir, ve nazolabial kırışmalar belirgindir. Nazolabial kırışmaların dinamik problemlerin evrimi olması veya cilt sarkmasının yerçekimi ve iskelet kası nedenlerinin kolajen kaybı kısmına dahil edilmemesidir.

**Seviye:** Sarı daire ile işaretlenmiş Seviye 3, nazolabial kırışma probleminin cilt kolajen kaybı orta düzeydedir.






# 3D simulation



Resimdeki problemlili bir cilt alanına tıklayın veya seçin, 3 Boyutlu durumda görüntüleyebilirsiniz ve cilt dokusu açıkça görülebilir.



# Skin Aging Prediction

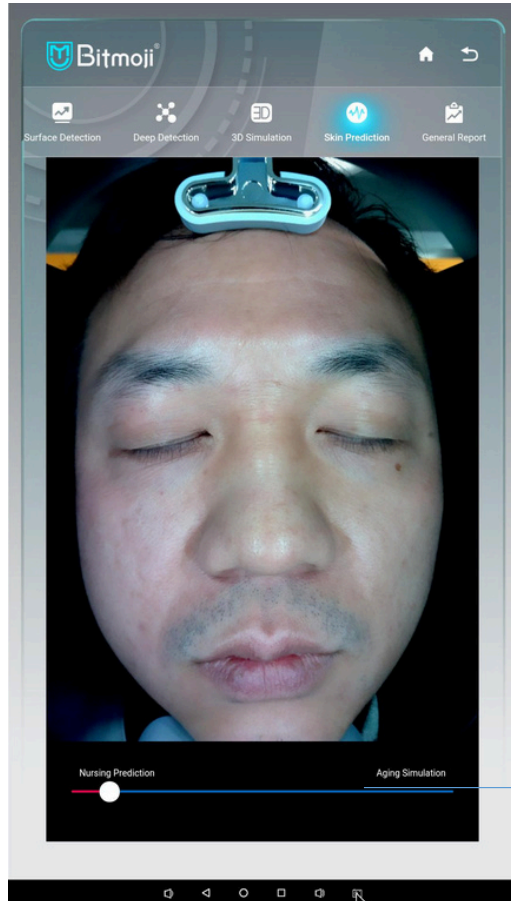

**Test:** Visual demonstration of images to predict the aging or beautification state of the skin after 5 to 10 years.

**Operation:** You can drag the image left and right. Dragging from left to right of the image demonstrates the states from youth to aging.

**Look at the picture:** You can make a crisis judgment by dragging the skin aging image to the right through the picture icon. If you don't take care of your skin properly, it will turn into an aging look.

You can move the image left and right. Moving from left to right of the image demonstrates the states from young and aging.



# Cilt Yaşlanma Tahmini



**Test:** Cildin yaşlanma veya güzelleşme durumunu tahmin etmek için 5 ila 10 yıl sonra görüntülerin görsel olarak gösterilmesi.


**Operasyon:** Görüntüyü sola ve sağa sürükleyebilirsiniz. Görüntü, gençlikten yaşlanmaya kadar olan durumları soldan sağa doğru göstermektedir.

**Resme bakın:** Cilt yaşılan görseli resim ikonu üzerinden sağa sürükleyerek kriz kararı verebilirsiniz. Cildinize gereken bakımı yapmazsanız yaşlanan bir görünüme dönüşecektir.

Resmi yatay olarak hareket ettirebilirsiniz. Görüntü, gençlikten yaşlılığa kadar olan durumları soldan sağa doğru göstermektedir.



# Kapsamlı analiz

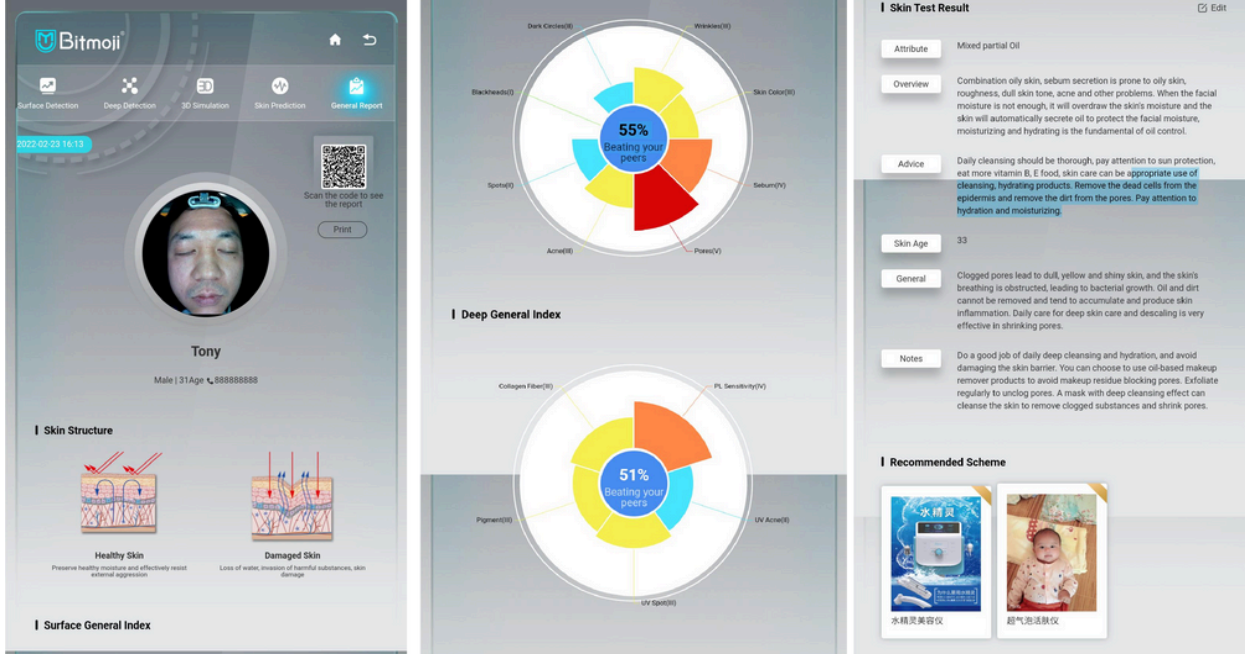

## Yüz özellikleri oranının ilginç hesaplaması:

Müşterilerle etkileşimin bir parçası olarak müşterilerin yüz özelliklerinin avantajlarını övmek ilginçtir.

## Yüzeysel ve derin katmanların analizi ve özeti

**Cilt:** Simgenin gösterdiği önem derecesine göre, müşterinin özel ihtiyaçlarına yönelik öncelikli kalem seçilir ve mağazanın ilgili iş kalemleri de ayrıntılı olarak açıklanabilir.

**Cilt özellikleri:** Kapsamlı test verilerine göre, cildin normal, kuru, yağlı, karma veya hassas cilde ait olup olmadığını değerlendirin ve analiz edin.

**Cilde genel bakış:** Yargıda bulunmak için cilt tipinin analizi ve açıklaması

**Cilt yaşı tahmini:** Büyük verilerin karşılaştırılması yoluyla müşterinin cilt yaşının değerlendirilmesi

**Kapsamlı genel bakış:** Tüm test verilerinin kapsamlı analizini gerçekleştirin ve hemşirelik programı önerileri sunun.

## QR kodunu tarayarak raporu alın:

Müşteriler, test raporunu almak için yukarıdaki QR kodunu tarayabilirler. Rapor yazdırılabilir: Kağıt raporlar, mağazadaki arka uçtaki bağlantı yönetimi aracılığıyla yazdırılabilir.




4

## Arka Plan Yönetimi




English ▾

## Management Center

 Please enter your mobile phone number

---

 Please enter a password

---

login free within 3 days

[Login](#)

[Register now](#) [Forgot password?](#)



# Arka Plan Yönetimi Oturum Açma Arayüzü



English ▾

## Management Center

Please enter your mobile phone number

Please enter a password

login free within 3 days

**Login**

[Register now](#) [Forgot password?](#)

### Oturum açma:

Oturum açma arayüzüne URL'yi ([zm.yimej.ai](http://zm.yimej.ai)) girin.

Sırasıyla kullanıcı adı ve şifreyi girin ve oturum açmak için oturum açma simgesine tıklayın.

**Not:** Kolaylık sağlamak için, onaylamak üzere her oturum açtığınızda "3 günlük ücretsiz oturum açma" sözcüklerinin önündeki simgeye tıklayabilirsiniz.

**Yönetim:** Arka uçtaki ayar yönetimi, cihaz sahibinin veya dağıtım yöneticisinin yönetimi altında olabilir ve isteğe bağlı olarak değiştirilemez.





# Arka Plan Yönetimi Ayarları - Genel İnceleme



Overview

深圳致美力禾实业发展有限公司

English

skin measurement today

3

skin test yesterday2

started the device today

1

Shopping Guide

0

Number of Goods

4

Things TO DO

No data

Shopping Guide

Name	Mobile	Yesterday	Today	store	device
深圳致美力禾实业发展有限公司	18933539668	2	3		S11078FC




# Arka Plan Yönetimi Ayarları - Genel İnceleme

**Kategorileri düzenleyin:** Giriş yaptıktan sonra arayüzün solunda Genel Bakış, Ürünler, Dış Görünüm Testi, Yapılandırma, Pazarlama ve Üyeler gibi altı bölüm görüntülenecektir.

**Genel Bakış:** Bu sütun, ürün, dış görünüm testi, yapılandırma, pazarlama ve üyeler gibi beş bölümü görüntüleyen kısayoldur.

**Sütun 1:** Bugünün toplam cilt testi sayıları, açılan cihazlar, çevrimiçi alışveriş kılavuzları ve girilen ürünler dahil. Sütun 2: Pazarlama etkinliği ayarları, anket etkileşimi ve alt hesaplar oluşturmak için büyük döner tabla dahil (bir cihaz, ana arka uç ana hesap tarafından yönetilen ve güncellenen birden fazla alt hesap oluşturabilir)

**Sütun 3:** Yapılacak işler ve alışveriş rehberinin yer aldığı Sağ tarafta: Resmi hesabın bağlayıcılığı ve acemi kullanım kılavuzu. Cihazın çalışmasını anlamıyorsanız öğrenmek için Acemiler için Kullanım Kılavuzu'na tıklayabilirsiniz.

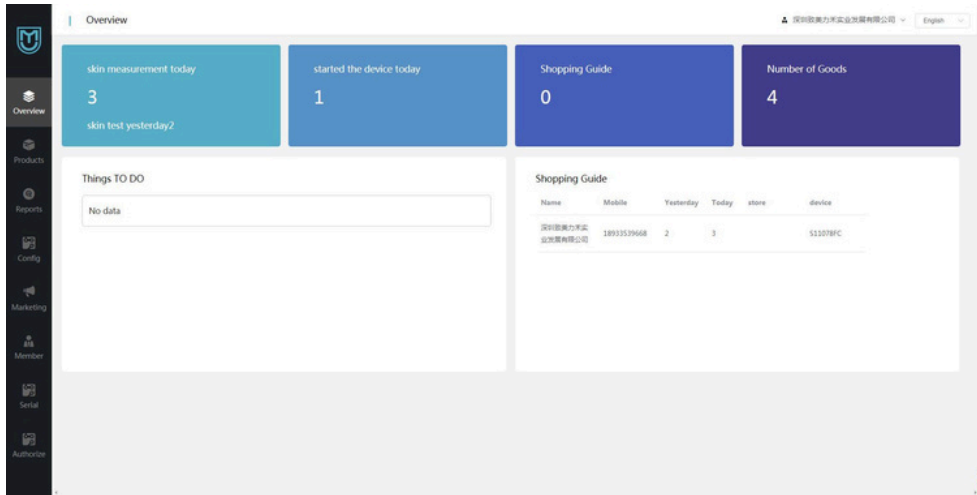

# Arka Uç Yönetimi - Ürün Ayarları



Products

深圳致美力禾实业发展有限公司 English

Add Goods Batch Delete

product keywords Search

ID	Product Image	Product_name	Price	Efficacy	Operation
159		超气泡活肤仪	6000.00	clean,Replenishment,Rejuvenation	<a href="#">Edit</a> <a href="#">Delete</a>
158		水精灵美容仪	6800.00	Replenishment,Pore shrinkage,Rejuvenation	<a href="#">Edit</a> <a href="#">Delete</a>
157		时光机美容仪	16800.00	compact,repair,antifading	<a href="#">Edit</a> <a href="#">Delete</a>
156		宇宙之星皮肤管理	20000.00	antifading,Anti wrinkle,compact	<a href="#">Edit</a> <a href="#">Delete</a>


20/page Total 4 < 1 >







## Ürün arayüzü açıklaması:

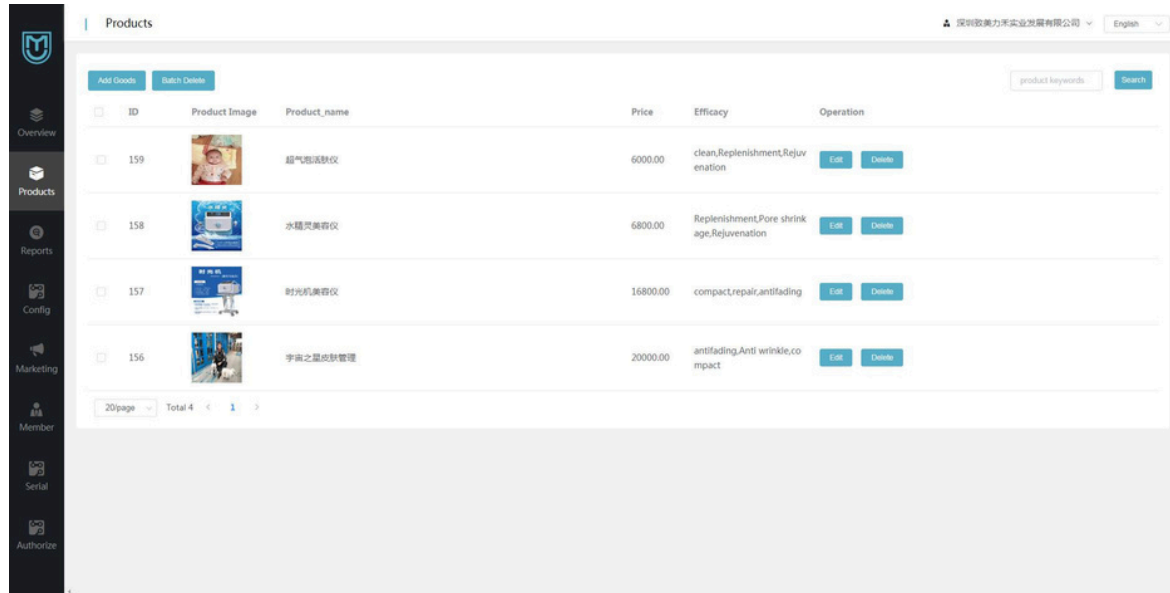Ürünlerin eklenmesi ve silinmesi işlemlerine ürün fotoğrafları, ürün adları, fiyatlar ve etkiler dahil edilir; düzenlemeler yapmak için düzenleme düğmesine, silmek için ise silme düğmesine tıklamanız yeterlidir. Toplu yükleme ve silme seçeneklerini de kullanabilirsiniz.

**Uygulama fonksiyonunun tanımı:** Ürünlerin girişi, güzellik uzmanlarının ürünleri doğru ve hızlı bir şekilde seçmesi ve satışları teşvik etmesi için cilt tespiti sırasında otomatik olarak ürün ve öge önerileri oluşturma amacına yöneliktir.



ID	Product Image	Product_name	Price	Efficacy	Operation
159		超气超活肤仪	6000.00	clean,Replenishment,Rejuvenation	<a href="#">Edit</a> <a href="#">Delete</a>
158		水精亮肤仪	6800.00	Replenishment,Pore shrinkage,Rejuvenation	<a href="#">Edit</a> <a href="#">Delete</a>
157		时光肌美容仪	16800.00	compact,repair,antifading	<a href="#">Edit</a> <a href="#">Delete</a>
156		宇宙之星点阵管理	20000.00	antifading,Anti wrinkle,compact	<a href="#">Edit</a> <a href="#">Delete</a>



# Arka Uç Yönetimi - Yapılandırma Ayarları

Products 深圳致美力采实业发展有限公司 English

\*Product\_name

Product\_price

\*Product Image

\*Suitable for people  Male  Female  All

\*effects  clean  Oil control  Pore shrinkage  Replenishment  Moisture  Lock water  skin whitening  Light spot  Sunscreen  Rejuvenation  Oxygen injection  compact  Anti wrinkle  antifading  Repair  Soothe  acne treatment  Detoxification  Eye care  repair  antioxidant  anti free radical  collagen  water oil balance  brighten skin color  fade acne print  pouch  eye lines  dark circles  lymphatic detoxification

Product Details  Normal  x<sub>2</sub>  x<sup>2</sup>  B  I  ”  ≡  ≡

hello world

OK



# Arka Plan Yönetimi - Yapılandırma Ayarları

## Yapılandırma arayüzü tanımı:


Konfigürasyon temel, kopya ve diğer türlerine ayrılmıştır.

## Metin yazımı düzenlemesi:

Cilt yüzeyi ve derin katmana ilişkin metin tanıtları, genel bakış ve sonuçların önerilmesi şeklinde bölünmüştür. Tüm seçenekler Düzenle düğmesi tıklanarak düzenlenebilir ve ardından Onayla düğmesi tıklanarak kaydedilebilir.

## Uygulama fonksiyonunun tanımı:

Bu bölüm, müşterilerin test sonuçlarını hızlı ve doğru bir şekilde analiz etmelerine olanak tanıyan ayrıntılı bir giriş sunar. Bu durum, müşteri güvenini artırır ve güzellik uzmanlarının mesleki gereksinimlerini azaltır.

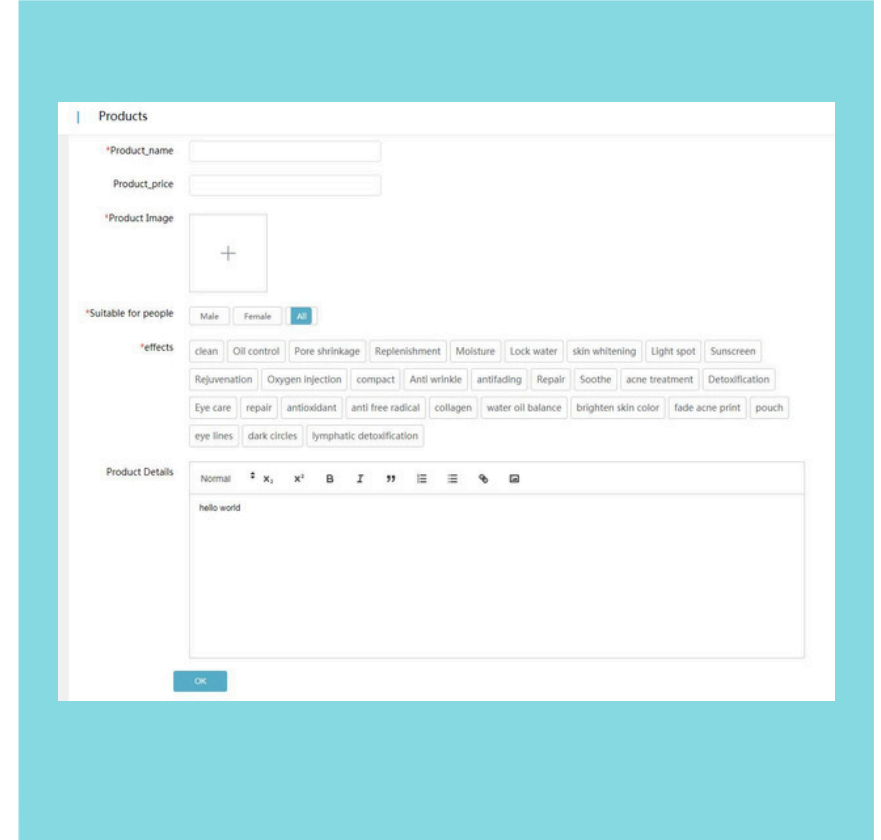

The screenshot shows a web-based configuration interface for a product. The interface is titled "Products" and contains several input fields and options:

- Product\_name**: A text input field.
- Product\_price**: A text input field.
- Product Image**: A placeholder for an image, indicated by a plus sign (+).
- \*Suitable for people**: Radio buttons for "Male", "Female", and "All".
- \*effects**: A grid of buttons representing various effects, including: clean, Oil control, Pore shrinkage, Replenishment, Moisture, Lock water, skin whitening, Light spot, Sunscreen, Rejuvenation, Oxygen injection, compact, Anti wrinkle, antifading, Repair, Soothe, acne treatment, Detoxification, Eye care, repair, antioxidant, anti free radical, collagen, water oil balance, brighten skin color, fade acne print, pouch, eye lines, dark circles, lymphatic detoxification.
- Product Details**: A rich text editor with a toolbar (Normal, Bold, Italic, Underline, Link, Unlink, Bulleted List, Numbered List, Indent, Outdent, Undo, Redo) and a text area containing "hello world".
- OK**: A button at the bottom right of the form.



# Arka Uç Yönetimi - Yapılandırma Ayarları



The image displays three overlapping screenshots of the EAST MEDICAL back-end management system configuration interface. The interface is organized into sections: Basic, Text, and Other. A vertical sidebar on the left contains navigation icons for Overview, Products, Reports, and Config. The top right corner shows the company name and language settings.

### QR code config

QR code configuration: QR code generated on H5 report page: [dropdown menu]

[OK] [Reset]

### surface detection

analysis dimension	analysis result	result Overview	result advice	Operation
<input type="checkbox"/> Blackhead	1 level care	Blackheads are the result of the oxidation of sebum inside the hair follicle opening by air and dust, mainly related to the high secretion of hormones. Daily life should pay attention to cleanliness and skin care, which can inhibit the formation of blackheads, reduce the sugar intake, and drink less sugary drinks such as milk tea and cola.	Pay attention to sun protection, moderate clean skin, keep the local skin clean and dry, you can use moisturizing skin care products, eat a light diet do not eat food with too high a salt content; eat more fresh fruits and vegetables, do not eat spicy and stimulating food. Reduce their own stress, appropriate to increase exercise, and develop good habits of work and rest.	[Edit]
<input type="checkbox"/> Blackhead	2 level care	The T-zone of the face is a high incidence of blackheads, as the sebaceous glands are active and secrete more oil that needs to be drained out through the skin pores. If not cleaned properly or too much sebum is secreted, a mixture of old keratin that is shed but not metabolized in time clogs the opening of the hair follicle. After being oxidized at one end in contact with the outside world, blackheads are formed.	Change your diet, take more beans, mushrooms, or dark green vegetables to replenish vitamin B and alkaline food, which can effectively inhibit oil production and reduce the growth of blackheads. Reduce the sugar intake, do a good job of moderate cleaning, avoid hand squeezing, you can use a cleaning mask once a week, with the use of acid products that can have unclogged pores, inhibit the production of blackheads.	[Edit]
<input type="checkbox"/> Blackhead	3 level care	Blackheads are the product of oxidation after the skin secretes excess sebum and old keratin mix. Usually, you should develop the habit of regular exfoliation and professional deep cleansing treatment every week, which can help remove skin dirt and grease, thus reducing the blackhead generation.	Daily care to remove makeup thoroughly, if makeup removal is not complete, not only will clog the pores, resulting in large pores, in addition to causing large pores, will also allow the growth of blackheads, pay attention to sun protection, often do care, avoid hand squeezing blackheads, can choose hydration and moisturizing, anti-oxidant effect of skin care products to slow the formation of blackheads.	[Edit]
<input type="checkbox"/> Blackhead	4 level care	Skin with visible blackheads are formed due to the keratinization and narrowing of the openings of sebaceous glands and the increased secretion of sebum contents, but they cannot be discharged effectively and smoothly from the follicular pores and accumulate inside the hair follicles, which are related to endocrine and dietary, as well as local cleanliness and hygiene factors of the skin.	Regular deep cleansing of the skin, and to avoid exposure to the sun, you can use a weekly cleansing mask, with the use of acid products that can gently adjust the keratin, unclogging the pores, do not squeeze by hand, easily lead to bacterial infection. Diet should not eat sweet, greasy, spicy and stimulating food, eat vitamin-rich fruits and vegetables to reduce skin oil secretion.	[Edit]

### content settings

chart display type:  column chart  Rose chart

skin color display:  5-level skin color classification  unevenness classification

skin age:  AI prediction algorithm  skin evaluation algorithm




reference customer age

[OK]





# Arka Uç Yönetimi - Yapılandırma Ayarları

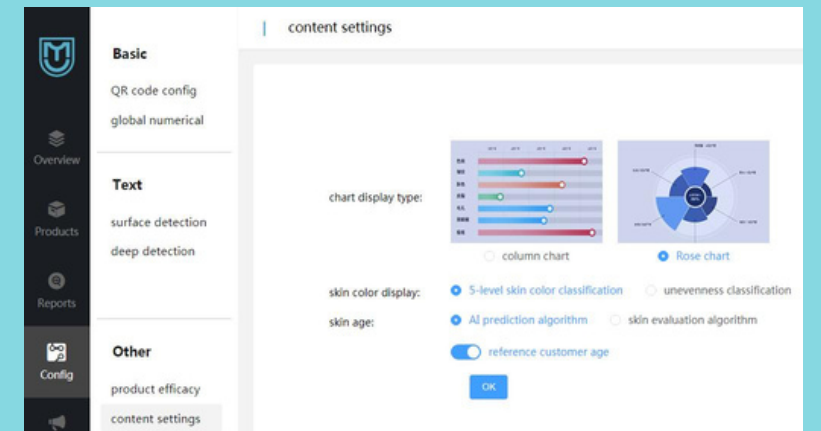
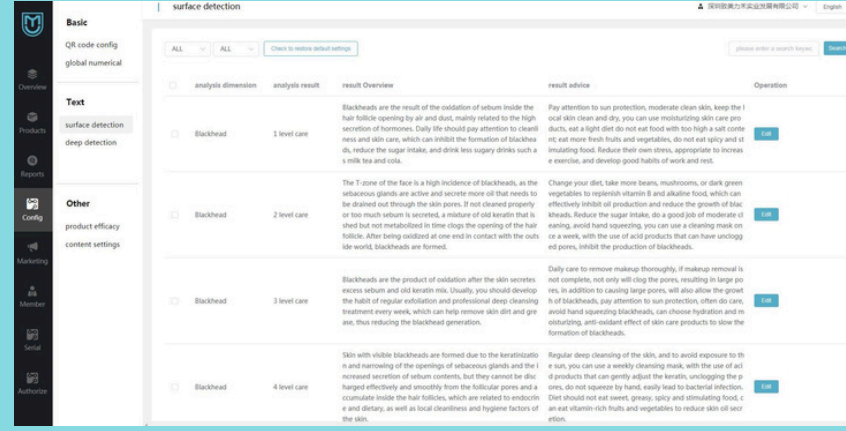
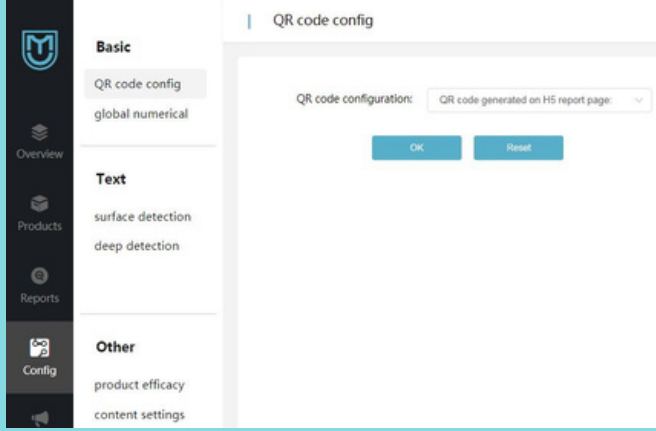


**Yapılandırma arayüzü tanımı:** Temel yapılandırma, kopya yapılandırma ve diğer yapılandırmalar olarak ayrılmıştır.

**Diğer düzenlemeler şunlardır:** Önerilen ürün verimlilik ve görsel yapılandırma ayarları.

- 1) Analiz boyutu:** Cilt problemlerinin analizini ifade eder (örneğin, sebum, akne, pigmentasyon, kırışıklıklar, gözenekler, hassasiyet, siyah noktalar, nem vb.)
- 2) Önerilen işlevler ve etkinlik:** İlgili cilt problemleri için sağlanan cilt bakımının anahtar kelimeleri.
- 3) Durum:** Cilt problemleri için etkinleştirilen cilt bakımı anahtar kelimeleri.
- 4) İşlem:** Varsayılan sistemin geri yüklenmesi, cihaz üreticisi tarafından belirlenen anahtar kelime seçenekleriyle uyumlu olmalıdır. Bakım düzenleme seçeneği, önerilen bakım anahtar kelimelerinin yeterince kapsamlı olmadığını düşünüyorsanız, düzenleme ve ekleme seçeneklerine girmek için tıklayabileceğinizi ifade eder.  
Her cilt problemi için üç adede kadar cilt bakımı anahtar kelimesi ekleyebilirsiniz.

# Arka Uç Yönetimi - Yapılandırma Ayarları

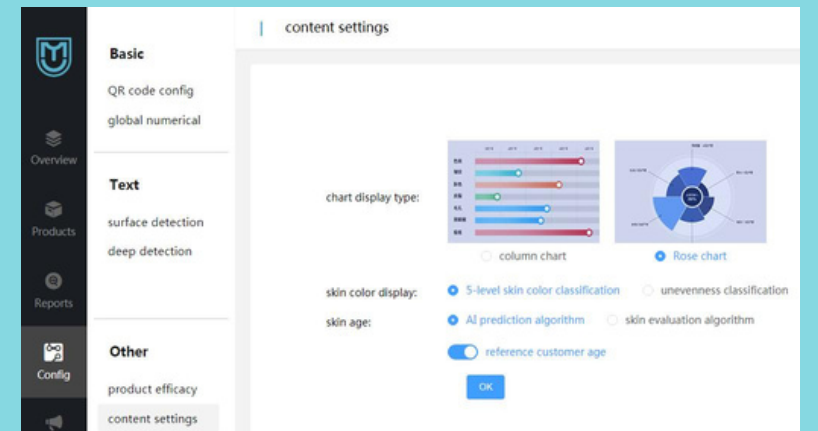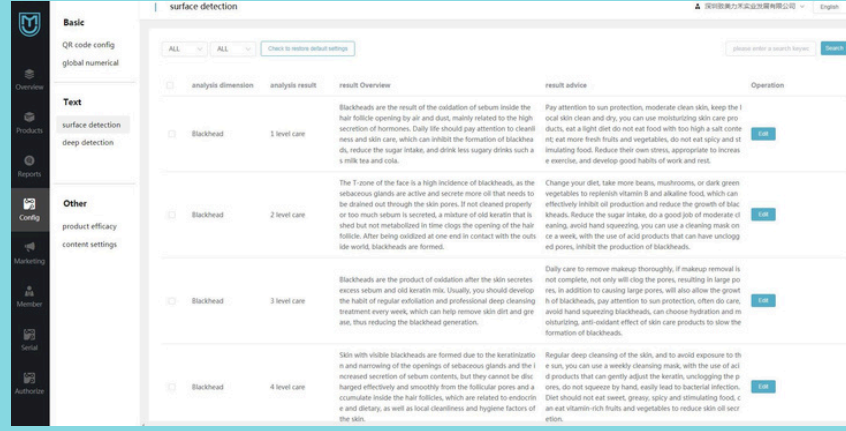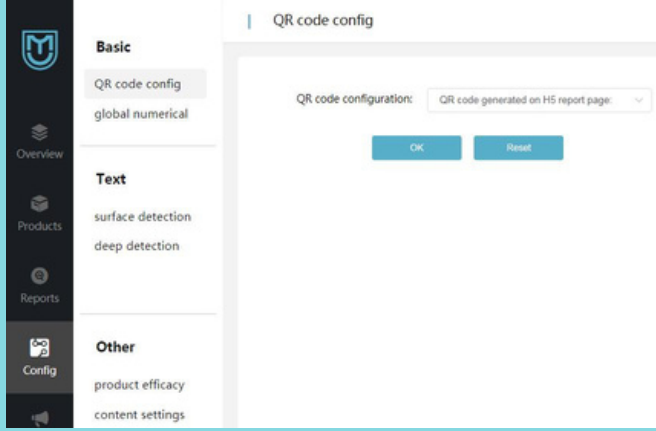



## Görsel Yapılandırma - İçerik Ayarları:

1) **Simge istemi türü:** Simge ekranının şekil seçimi için iki seçenek vardır: sütun grafiği ve gül grafiği.

2) **Müşterinin referans yaşı:** Hayır gizlemek, Evet görüntülemek anlamına gelir ve son olarak Tamam'a tıklayın. Uygulama fonksiyonunun açıklaması: Analiz boyutunun seçimi, güzellik salonunun ana iş bakım öğelerine dayanmaktadır. Örneğin: akne bakımı yapan bir mağaza yalnızca akne, büyük gözenekler, yağ içeriği, keman dağılımı ve cilt hassasiyeti pigmentlerini vb. tespit etmeyi seçebilir. Ürün anahtar kelimelerinin seçimi test için uygundur ve doğru bakım göz alıcı öneri, tespit edildikten sonra hızlı bir şekilde ortaya çıkacaktır.



# Pazarlama Bölümü Arka Uç Yönetimi Ayarları

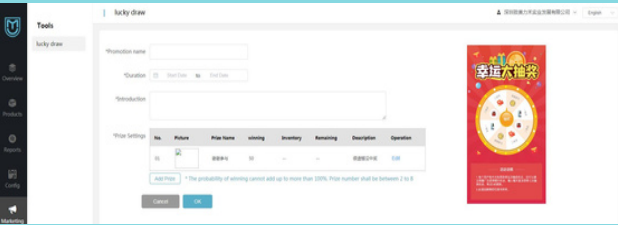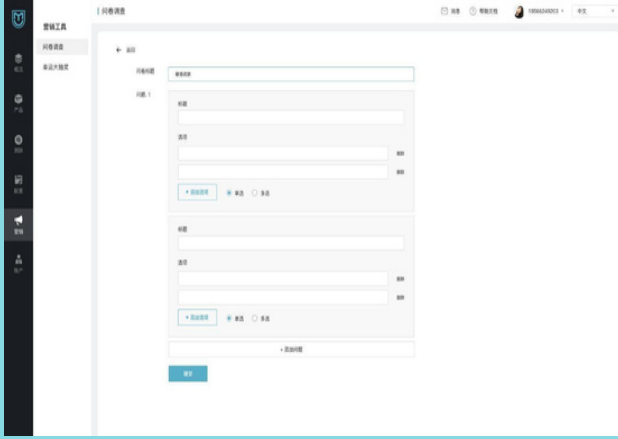

## Pazarlama stratejileri:

Anket ve çekiliş gibi etkinlikleri eklemek ve kaldırmak için temel olarak kullanılır. Sağ üst köşedeki "Ekle" simgesine tıkladığınızda Ayrıntı Ekle arayüzü açılacaktır. Etkinlik adını, saati, profilini ve ödül ayarlarını eksiksiz bir şekilde doldurun ve son olarak Tamam'a tıklayın. Her ana hesap, ödül havuzu hediyelerini ve yüzdelerini arka uça ayarlayabilir.

**Uygulama fonksiyonunun tanımı:** Pazarlama faaliyetleri, anketler ve şanslı çekilişler gibi etkinlikler aracılığıyla müşterilerle etkileşimi artırabilir ve mağaza içi ürünlerin satış ilerlemesine destek olabilir. Etkinlikler, ihtiyaçlara göre özelleştirilebilir.



# Arka Plan Yönetimi Ayarları - Hesap Ayarları



ID	name	mobile number	store	password	permission	status
No Data						

### adding sub accounts

account name

mobile number

store

login password

permission

account status  enabled  disabling

## Hesap kısmı:

Alt hesap eklemek için kullanılır (bir ana hesap birden fazla alt hesapla eklenebilir ve arka uç alt hesapların dinamikleri her bir ana hesap aracılığıyla görülebilir ve ürün planı senkronize edilebilir).

Alt Hesap Ekle simgesine tıklayın ve açılan alt hesap ekleme sayfasında hesap adı, cep telefonu numarası, mağaza, giriş şifresi, yetki, hesap durumunu sırayla doldurun ve son olarak tamamlandığını onaylamak için Tamam'a tıklayın.

## Uygulama işlevinin açıklaması:

Alt hesapların eklenmesi ve ana hesabın eşzamanlı yönetimi, birden fazla mağazanın ve çevrimiçi yönetimin çalışmasını kolaylaştırır.







[www.eastmedikal.com](http://www.eastmedikal.com)

