

DEFOND

DF-NM01

PORTATİF İĞNESİZ MEZOTERAPİ

KULLANIM KLAVUZU

User Manual



Çalışma Teorisi

Elektroporasyon ve Elektroosmoz tekniklerini kullanır, (iğnesiz mezoterapi veya mezoderm veya hücre rüptürü) tekniği, herhangi bir enjektör olmadan, aquaporini (AQP) kolayca açar, cildin istediği beslenmeyi taşır, böylece her türlü cilt problemini tedavi eder. Elektroforez enerjisinin güzellik endüstrisine uygulanmasıyla, yüksek enerjili beslenme serumunu doğrudan cilt dokusuna taşımak, hızlı bir şekilde emilmesine ve etkili olmasına izin vermek, cilt metabolizmasını teşvik etmek, cildi elastik ve ince tutmak için yönlendirme, katman odaklı ve rasyon yoluyla 'noktadan noktaya' infiltrasyon tekniklerini alır.

[AQP, hücrelere giren ve çıkan suyun ana kanalıdır.](#)

Elektroporasyon ve elektroosmoz nedir?

Elektroporasyon: Doğrudan cilde etki eder, cilt dokusu penetrasyonunu anında artırır. Elektroşok işlevi altında, hücrelerin lipid mobilizasyonunda delikler oluşacak, aynı zamanda orijinal olarak emilmeyen hidrofik molekül hücrelerin içine nüfuz edebilecektir. Delikler oluşuktan sonra, birkaç saniye ile birkaç dakika arasında, elektroşokun uzunluğuna göre açılma durumunu koruyacaktır.

Elektroosmoz: Esas olarak dağılacak olan madde molekülüne etki eder, cildin içine serbestçe nüfuz etmesine yardımcı olur. Aynı kalitede elektrik yükleri karşılıklı itme kuvvetine sahiptir, bu nedenle pozitif beslenme molekülüne pozitif akım atabilir, untritin molekülünü cilt dokularına itebilir. Aynı zamanda nötr molekül de cildin içine nüfuz edecektir.

Fonksiyonlar

Çil giderme ve cilt beyazlatma: Açık hücreler yarasız kanalize olur, beslenmeyi emer, hücre metabolizmasına katılır, hücrelerin yeniden oluşumunu teşvik eder.

Kırıxıklık giderme: Elektrot beslenmesi doğrudan derin yerleşimli cilde nüfuz eder, hücrelerin yeniden canlanmasını başlatır, derin cilt tabakasının kırıxıklıklarını giderir.

Sivilceye engel ol: Elektrikli beslenme konveyör bandı aracılığıyla, akne giderici distilatı odağa enjekte edin, aknenin yeniden oluşumunu temizleyin veya kısıtlayın, yara enfeksiyonunu önleyin..


Nemlendirin ve su ile makyaj yapın: Su besleyici aktif distilatı derin yerleşimli cilde enjekte edin, hücrelere yeterli su sağlayın, su eksikliğinden kaynaklanan bir dizi cilt problemini önleyin.

Piyasa avantajı

- 1), Yeni müşteriler çekmek ve güzellik salonlarının görünürlüğünü artırmak için
- 2) Güzellik salonunun kalitesini artırmak ve kar alanını genişletmek
- 3), Ürünlerin etkinliğini artırmak, ürün fiyatını yükseltmek, tüketimi teşvik etmek.
- 4), Yeni kurslar, yeni ürünler açmak.
- 5), Bakım verimliliğini artırmak, güzellik uzmanının kendine güvenini artırmak ve daha

sonra ürün satmak için inisiyatif almak için herhangi bir ürünle birlikte kullanılabilir.

KONTROL PANELİ

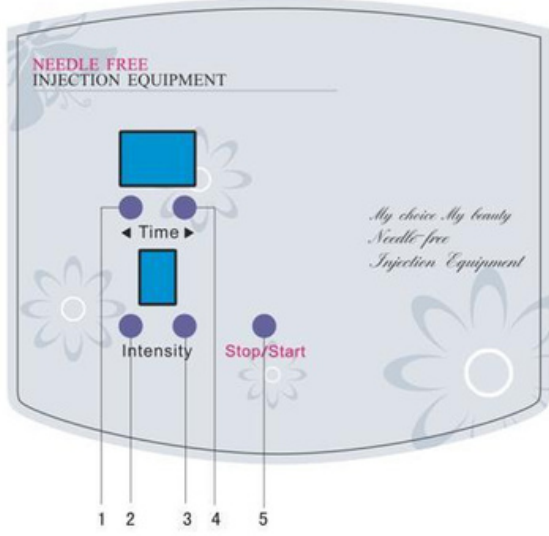

- 1.Zaman (-)
- 2.Yoğunluk (-)
- 3.Yoğunluk (+)
- 4.Zaman (+)
5. Durdurma/Başlatma


AKSESUAR GÖSTERİMİ



Serum şişeli Mezoterapi



İletken Probu

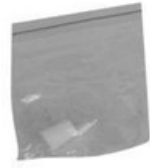

Serum şişesi kapağı (Beyaz)

- 1) Mezoterapi:** Müşterinin tedavisine göre, ilgili özü veya besleyici maddeyi doldurmak için Mesogun ile donatılır. Mesogun'u çalıştırarak, özü derinlemesine cilde enjekte etmek, en iyi güzellik etkisini elde etmek. Güzellik uzmanı, Mesogun'u daire hareketi ile çalıştırabilir, tedavi edilen cilt yüzeyinde gelip giderek hareket ettirebilir.

- 2) İletken prob:**

AKSESUAR LİSTESİ

No.	Açıklama	Adet
1	Mesogun	1ad
2	İletken prob	1ad
3	serum şişesi	1ad
4	Serum şişesi kapağı (Beyaz)	1ad
5	Elektrik kablosu	1ad
6	Kullanım kılavuzu	1 Kitap



Mesogun'u takmak için.



İletken probu takmak için.

İŞLEM ADIMLARI

Kişisel ipuçları:

1. Tüm aksesuarların doğru bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin, aksesuarları temizleyin veya dezenfekte edin.
2. Gücü prize takın ve kontrol panelinin genel gücünü açın.
3. Tedavi edilen seyre göre Zaman düğmesine tıklayarak Zamanı ayarlayın;
4. Serum şişesi, kullandıktan sonra herhangi bir serum kalıntısı varsa, serumun buharlaşmasını önlemek için lütfen kapağı sıkıca vidalayın.
5. Tedavi bittikten sonra, lütfen çalışmayı duraklatın, ardından genel gücü kapatın, ardından yedek parçaları temizleyin, bunları ve makineyi orijinal yerine yerleştirin.

1. Güç kablosunu takın, makinenin gücünü açın.
2. Şişeye serum doldurun (suda çözünürlük daha iyidir),
3. Müşteri İletken probu tutmalıdır, güzellik uzmanı müşterinin hissine göre Yoğunluğu düşükten yükseğe ayarlar. Ayarlamadan sonra, Durdur / Başlat düğmesine basın, Ardından Zamanın altında sağ alt köşeyi görebilirsiniz, bir nokta yanıp söner, bu da makinenin çalıştığı anlamına gelir.
4. **Tedavi sırasında lütfen serum şişesinin kapağına basın, ardından Mesogun serumu cilde enjekte edebilir.** İşlemden sonra, çalışmayı duraklatmak için Stop/Start düğmesine basın, ardından makinenin gücünü kapatın. Yedek parçaları temizleyin ve orijinal yerlerine iyice yerleştirin.

Herkese uygulanabilir:

1. Yüz cildi iyileştirme:

- (1) Yağlı cilt, büyük gözenekler, kalın boynuzluluk;
- (2) Cilt rengi koyu, yorgunluk, solukluk, damla ve oksijen korkusu.
- (3) Olgun cilt, gevşek, susuz, kırışık, kuru.

2. Göz bakımı

- (1) Siyah göz çukuru, göz torbası, kırışıklık, damla.
- (2) Kan damarları, detoksifikasyon

TEDAVİ SÜRESİ ÖNERİSİ (Sadece referans için)

Kurs	Tedavi Süresi (PD)	PD/Hafta	Teklif/PD (RMB)
Gözleri Canlandırıcı	12kez/PD	2-3kez	2200
Kırışıklık giderme	12kez /PD	2-3kez	2500
Detoksifikasyon	10kez /PD	3kez	1800
Gözenekler küçülüyor	12kez /PD	1-2kez	1500
Cilt gençleştirme	12kez /PD	2-3kez	2200
Boyun bakımı	10kez /PD	2-3kez	1800
Cilt beyazlatma	12kez /PD	2-3kez	3980

Konvansiyonel çalışma notları

Makineyi kullanmadan önce, lütfen aksesuarların iyi bağlanıp bağlanmadığını kontrol ettiğinizden emin olun.

1. Refluans akımı olgusunu önlemek için önce fişi prize takın, ardından kontrol panelinin gücünü açın.
2. Aksesuarların kabloları ana çerçevenin soketlerine iyi bağlanmalıdır. Kötü bağlantıdan ve aksesuarların işe yaramaz hale gelmesinden kaçındığınızdan emin olun.
3. Makineyi taşıırken dikkatli olun. Sabit, kuru bir yere yerleştirin, iterken, aksesuarların yere düşmesini ve işe yaramamasını önlemek için lütfen kolu tuttuğunuzdan, aksesuarları aksesuar tutucuya koyduğunuzdan emin olun.
4. Bitirdikten sonra aksesuarları temizlediğinizden ve dezenfekte ettiğinizden emin olun. Ancak ana çerçeveyi temizlemek için alkol veya buharlaşan dezenfektör kullanmayın. Ana çerçevenin kırılmasına neden olur. Ürünlerin ana çerçeveye geri dönmesini ve makineye zarar vermesini önlemek için artık ürünleri temizlediğinizden emin olun.
5. Serumu serum şişesine doldururken lütfen dikkatli olun. Temel ürünleri temizlemek için lütfen önce ılık su kullanın, ardından kuru bir yere koyun. Yüksek sıcaklıkta atılmak üzere fırına koymadığınızdan emin olun.
6. Çalıştırmadan önce, lütfen müşteri ve güzellik uzmanı tüm metal süslemeleri çıkarın.
7. Lütfen tedaviyi yaraları olan ciltten uzak tutun. Yüz felci olan hastalar üzerinde kullanmayınız.
8. Ciddi vazodilatör olanlara uygulamayınız.
9. Kalp hastalığı, yüksek tansiyon, diyabeti olanlara uygulamayınız.

NOT

BASİT SORUN GİDERME

1. Ekran yanmıyor, çalışmıyor.

Sorunlar:

- 1) Güç kablosu iyi bağlanmamış;
- 2) Islak durum, ana çerçevenin içinin anormal çalışmasına neden olur.
- 3) İşlemden sonra makinenin kapatılmaması, makinenin boş çalışmasına neden olur.
- 4) Makineyi temizlemek için alkol kullanılması veya temizlik sırasında makinenin içine bir miktar su girmesi.

Sorun Giderme:

- 1) Tedavi sırasında güç kablolarının iyi bağlandığından emin olun.
- 2) Makine yüksek kaliteli elektronik bir makinedir. Islak ortamlara koymadığınızdan emin olun. Uzun süre kullanılmayacaksa, makineyi paketlemek için nem geçirmez bir torba veya toz geçirmez torba kullanılması önerilir. Ancak, içindeki elektronik parçaların ıslanmasını ve eskimesini önlemek için lütfen her 15 günde bir bir saat elektrik verin.
- 3) İşlemden sonra, makinenin boş çalışmasını önlemek için gücü kapattığınızdan ve güç kablosunu fişten çektiğinizden emin olun.
- 4) Makine tam otomatik bilgisayar çipi tarafından kontrol edilir, bu nedenle kullanım sırasında, makinenin normal çalışmasını önlemek için lütfen çevresinde yüksek frekanslı makine kullanmayın. Mikrodalga fırın, saç kurutma makinesi vb. Eğer girişimsel olgular varsa, normalde iki durum söz konusudur. A. Normal kullanım sırasında aniden kapanır; B. Ekranda flutte görülür. Öneri, gücü kapatmak ve ardından makineyi yeniden başlatmaktır.
- 5) Makineyi temizlemek için alkol, tiner gibi yüksek asitli, yüksek alkali madde kullanmadığınızdan emin olun. Bulaşık deterjanını öneriyoruz. Lütfen ana gövdeyi ve yedek parçaları zamanında temizleyin, lütfen makinenin içine su girmesine izin vermeyin.

2: Yedek parçalar çalışmıyorsa.

Sorun bunlar olabilir:

- 1) Güç kablosunun bağlantısı gevşemiş veya çalışma şekli yanlış.
- 2) Makinenin içine su sızıyor.

Sorun Giderme:

1. Her yedek parça yüksek kaliteli bir parçadır, kullanım sırasında veya kullanımı bittiğinde, kullanım ömürlerini kısaltmamak için dikkatli bir şekilde muhafaza ettiğinizden emin olun, lütfen kullanırken hafifçe alın ve yerleştirin ve kollarını tutun, sadece kablolarını tutmadığınızdan emin olun, bu da yedek parçaların iç bağlantılarının gevşemesine neden olur, ardından zayıf bağlantı ve kısa devre yapar.
2. Yedek parçaları kullandıktan sonra, lütfen rastgele yerleştirmeyin. Lütfen bunları bulaşık deterjanı ile temiz bir bezle temizleyin, özellikle temel ürünleri temizleyin. Yedek parçaları suyun içinde temizlemeyin.

KARGO HİZMETİ

Ekipmanlarımızın kalitesini garanti ederiz, normalde kalite sorunu yoktur

1. Bir eksiklik varsa, lütfen nedenlerini e-posta ile gönderin veya bizi arayın, bunun e-posta veya telefonla halledilmesi en iyisi olacaktır. Çünkü bazı sorunlar makinenin yanlış kullanılmasından kaynaklanmaktadır.
2. Müşteriye sorunun meydana geldiği alanın fotoğraflarını çekmesini öneriyoruz, bunları teknisyenimize ileticeğiz, teknisyenimiz 1-2 iş günü içinde tatmin edici bir cevap verecektir.
3. Sorun yedek parçadan kaynaklanıyorsa, müşterimiz için bir sonraki siparişiyle birlikte gönderilebilecek yedek parçayı değiştirmeyi düşünebiliriz. Bir sonraki sipariş belirsizse, yedek parçaların gönderilmesi için kargo ücretini ödeyebiliriz.
4. Sorun ana cihazdan kaynaklanıyorsa, müşterimize cihazı tamir için normal posta yoluyla şirketimize geri göndermesini tavsiye edebiliriz veya müşterimize yeni bir cihaz gönderebiliriz. Sorunlu cihazı East Medikal'e geri göndermenin maliyeti yeni bir cihazın değerinden fazlaysa, East Medikal bunu dikkate alacak, fiili duruma göre tamamen yeni bir cihazı müşterimize yeniden göndermek için uygulayacaktır.
5. Alt ekipman çok büyük veya pahalıysa, postane ile geri göndermek uygun değilse, size atanmış bir adres vereceğiz, önce adresi gönderebilirsiniz. East Medikal, işbirliği yaptığı bir göndericiden geri almasını isteyecektir. EastMedikal, adresten ofisimize kadar olan tüm masrafları ödeyecektir. Ekipmanın kalitesinin düşük olup olmadığını kontrol ettikten sonra, bir sonraki siparişinizde, aşağıdaki durumlarda nakliye ücretini müşterinin ofisinden EastMedikal'e kesmeyi de kabul ediyoruz.

Hepsi bir arada, size hizmet etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve ayrıca tam işbirliğinize ihtiyacımız var. Teşekkürler.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1. Bakım garantisinin süresi, makbuza göre satın alma tarihinden itibaren bir yıldır. (Harcanabilir ürünler buna dahil değildir.) Bakım garantisine dahil olmayan veya zaman aşımına uğrayan diğer ürünlerin bakımını ve yenilenmesini de sağlıyoruz, ancak ücret talep ediyoruz. Parçaların ve kolayca tüketilebilen ürünlerin satın alınmasında değişiklik yapılması gerekiyorsa lütfen bayi ile iletişime geçin.
2. Aşağıdaki gibi sorunlar olursa bakım garantisi vermeyeceğiz:
 - a) Makineyi kendi başınıza sökmek;
 - b) Dikkatli olmadan düşürmek;
 - c) Makul muhafaza ve koruma eksikliği;
 - d) Kullanım kılavuzuna göre çalıştırılmaması.
 - e) Masraflı nedenler

Makinenin tasarımında ve özelliklerinde değişiklik olursa, size ek olarak haber vermeyeceğiz. Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen yerel pazarlama şirketi ile iletişime geçmekten çekinmeyin.

DEFOND

MARKA :DEFOND

ÜRÜN KODU :DF-NM01

GERİLİM: 220V-240V.60hz

AGIRLIK: 3.5KG

DEFOND



Üretici Firma :

Guangzhou Defond Electronic Technology Co. Ltd.
2nd Bldg C, No.569, Huangbian North Baiyun District,
Guangzhou, CHINA

İthalatçı Firma :

EAST MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.
Fevziçakmak Mah. Yakamoz Cd. No:11/C Büsan Organize Sanayi
42050 Karatay KONYA

0850 255 42 42

Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir ve Eastmedikal'nin bir taahhüdü olarak yorumlanmamalıdır. Eastmedikal., bu belgede görünebilecek herhangi bir hatadan sorumlu değildir ve ticari elverişlilik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili kısmi garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu materyalle ilgili olarak açık veya kısmi hiçbir garanti vermez. Eastmedikal., bu belgenin ve program materyalinin kullanımıyla bağlantılı veya kullanımından kaynaklanan tesadüfi veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan sorumlu olmayacaktır.

LÜTFEN BU BİLGİLERİ İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN.

Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizimle
0850 255 42 42 telefondan iletişime geçin.

SATINALMA TARİHİ

FATURA NUMARASI

İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SATIN ALMA TARİHİNİZİ VE FATURA NUMARANIZI NOT EDİN